



取扱説明書

アストラル・スター



本製品をご使用になる前に、本マニュアルを必ずお読みください。

バージョン 5.8
2026 年 5 月 30 日更新

1. 一般事項

1.1 製品の特徴および用途

Astral Star は、身体のエネルギーを調和させ、感情の明晰さを高めるために設計された最先端の携帯型ウェルネスデバイスです。

高度なレーザー光技術、磁場、およびスカラー波技術を活用し、深いリラクゼーションとエネルギーバランスの向上をサポートします。

高周波レーザー照射とスカラー波フィールド技術により、生体エネルギーフィールド（バイオフィールド）を刺激し、全体的な健康とウェルビーイングを支援します。

Astral Star アプリと連携することで、さまざまなシンボルプログラムを利用し、目的に応じたエネルギーサポートを受けることができます。

さらに深い体験をご希望の場合は、Mandala Scan を使用してエネルギーフィールドを分析し、最適な調和状態を実現するための最適なシンボルを見つけることができます。

お手元の Astral Star は厳格な品質検査を経ており、いつでもどこでもあなたのエネルギー向上をサポートする準備が整っています。

1.2 製品仕様

- 治療サポート用のレーザー周波数調整およびシンボル投影装置
- 電子制御回路を採用
- 赤色レーザー、緑色レーザー、青色レーザー、および PCB スカラーコイルを搭載
- Bluetooth 通信に対応し、スマートフォンから操作可能

1.3 安全上の警告

- 開封後、すべての付属品が揃っていることを確認してください。
- 本マニュアルに記載されている安全上の注意事項をよく読み、必ず従ってください。
- 本製品にはレーザーが搭載されているため、装置を直接見ながら電源を入れないでください。
- 水の近くや湿気の多い場所では使用しないでください。
- 専門技術者でない場合は、製品を分解しないでください。
- ストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。
- 必ず本マニュアルで指定された電源をご使用ください。

1.4 保証について

- Mandala Astral Star には、ご購入日より 1 年間の保証が付いています。
- 問題が発生した場合は、速やかにカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 以下の場合は保証対象外となります。
 - 誤使用または不適切な取り扱い
 - 無断改造または分解

- 関税・輸入費用
- 間接的な損害
- 誤使用による修理が必要な場合、修理費および送料はすべてお客様負担となります。

1.5 重要な注意事項

- 製品に損傷が見られる場合は使用せず、サポートへご連絡ください。
- ご使用前に、お住まいの国の電圧に対応していることを確認してください。
- 本製品を分解または改造しないでください。
- 雨、高湿度、高温、ほこりを避け、乾燥した環境で保管してください。

1.6 メンテナンス

1. アプリから操作できない場合は、一度電源を切り、再度電源を入れてください。
2. お手入れには柔らかい布、または水性ガラスクリーナーをご使用ください。
3. 製品の性能を維持するため、常に清潔な状態を保ってください。
4. 直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。
5. Astral Star プログラムの推奨使用時間は1回 10～30 分です。
6. 長時間使用する場合は、2～3 時間連続使用した後、1～2 時間の休憩を取ってください。
7. ご不明な点や問題がある場合は、カスタマーサポートへお問い合わせください。

1.7 ご使用開始方法

- 220V AC 電源コードを接続し、本体背面の赤い電源スイッチを押してください。
- Bluetooth でスマートフォンと接続します。AS-XXXX
- アプリケーションで希望するプログラムを選択してください。
- 電源を切る場合は、本体背面の赤いスイッチを押してください。

1.8 詳細設定

- 本体背面には、技術システムの各種設定を行うためのディスプレイがあります。
- 本体背面には、投影されるレーザーシンボルのサイズを調整するボリュームノブがあります。
- アプリケーション内では以下の機能をご利用いただけます。
 - ユーザーが選択できる 23 種類のシンボルグループ
 - オリジナルのプリセットを作成・保存できる「プリセット機能」
 - 他のユーザーとプリセットを共有できる「オンラインプリセット機能」
 - Mandala Scan と連携するスキャン機能
 - 合計 11 言語に対応

1.9 同梱内容

- Astral Star 本体
- 220V AC 電源コード
- クリスタルホルダー
- ユニバーサルシンボル・クリスタルスフィア
- パッケージボックス



2. 技術仕様

2.1 製品仕様

入力電圧：	220V AC
消費電力：	最大 50W
レーザー出力：	Mandala Astral Star（クラス 3B レーザー）
赤色レーザー：	182mW / 638nm
緑色レーザー：	114mW / 532nm
青色レーザー：	257mW / 450nm
スキャン速度：	0～30kpps
レーザーカラー：	
ホワイト：	497mW
レッド：	182mW
グリーン	114mW
ブルー：	257mW
イエロー：	240mW
マゼンタ：	382mW
シアン：	374mW
レーザーパターン：	アプリケーションから無制限に選択可能
冷却方式：	ファン冷却
動作温度：	屋内使用（10～35℃）
本体カラー：	ホワイト
本体材質：	アルミニウム、アクリル、ABS 樹脂
本体サイズ：	260 × 180 × 90 mm
総重量：	3kg
接続方式：	Bluetooth 5.0

2.2 各部の名称と機能

ディスプレイスクリーン：Bluetooth 接続状態および本体の動作状況を表示します。



2.3 設置および操作方法

1. 電源コードを差し込み、レーザーライトのスイッチをオンにして、レーザーの動作を確認してください。その際、目に入らないよう十分にご注意ください。感度調整ノブを回すことで、レーザーパターンの大きさを調整できます。




- つまみを12時の位置に合わせることをお勧めします。
- チューニング（調整）が低すぎると、レーザーが過度に集中し、前方に配置されているクォーツ球が火傷（破損）する恐れがあります。
- チューニングが高すぎると、シンボルジェネレーターモジュールが損傷する原因となります。

2. デバイスは現在スタンバイモードになっており、デフォルトのパターンが表示されているはずです。ディスプレイ画面に「AL」と表示され、アプリとのペアリング準備が完了していることを確認してください。デバイスがBluetoothで接続され、Mandala Star アプリとのペアリングが完了すると、「APP」と表示されます。



スタンバイモード

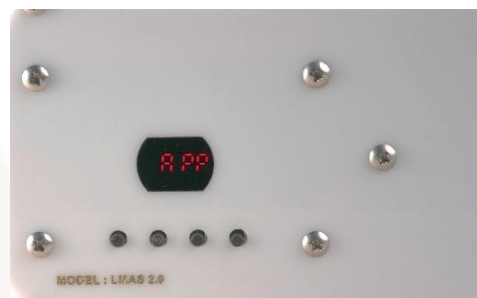

Bluetooth 接続済み / アプリとペアリング完了

3. サポートパーツをレーザー出力ヘッドに取り付けます。クリスタル球をホルダーに配置してください。クリスタルホルダーとハーモナスティックスフィア（調和球）の両方を固定し、ネジを締めつけてクリスタルホルダーをロックします。




3. Astral Star アプリケーション

3.1 アプリケーションのセットアップ


Astral Star アプリは iOS および Android に対応しています。iOS の場合は App Store から、Android の場合は Google Play ストアからダウンロードしてください。中国国内のユーザー様は、弊社のウェブサイトからダウンロードをお願いいたします。

<https://light-mandalas.com/application/>

App Store (iOS)

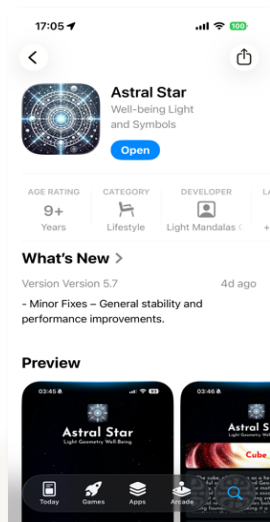


Play Store (Android)

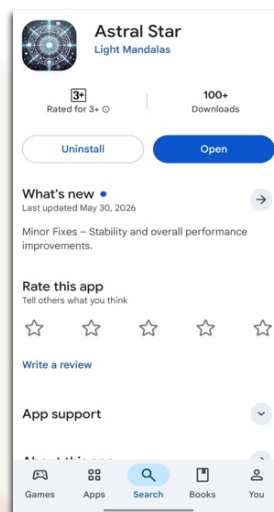


3.2 アプリケーションとの Bluetooth ペアリング

右下の「設定」アイコンをタップし、「Set up Astral Star」を選択します。アプリが近くのデバイスを検索します。表示されたシリアル番号を選択し、Bluetooth で接続してください。

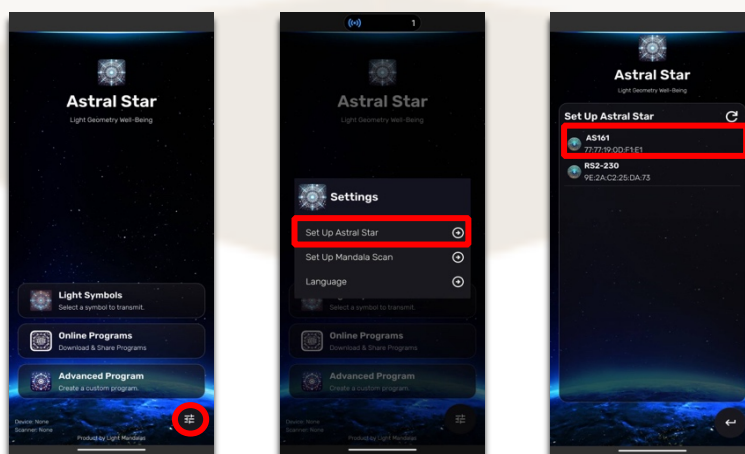

3.3 ライトシンボル (Light Symbols)


ライトシンボルのライブラリでは、Astral Star アプリケーションに含まれるすべての周波数を表す、さまざまなシンボルを確認できます。これらのシンボルはそれぞれ異なるエネルギーパターンに対応しており、アプリで利用可能な周波数を理解し、それと対話する（連動させる）のに役立ちます。

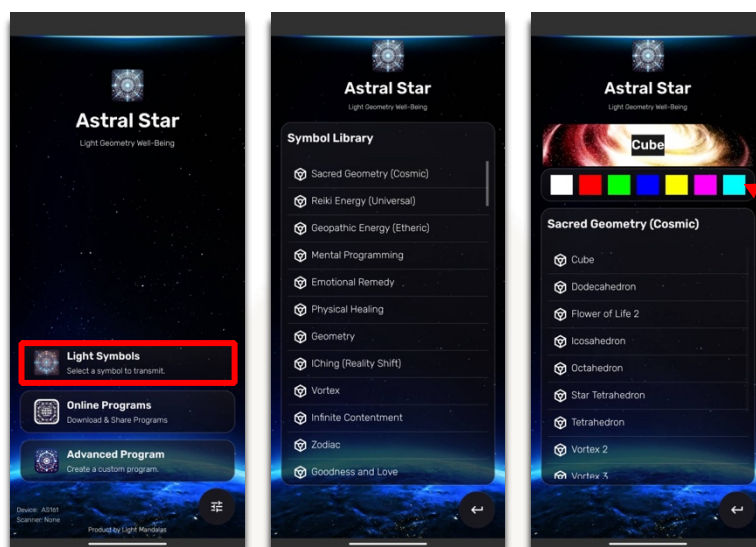

ユーザーはシンボルの色を変更することができます。

3.4 オンラインプログラム

オンラインプログラムでは、チャクラの調整やエネルギーのクレンジングなど、ウェルビーイング（心身の健康）とバランスをサポートするために設計された、Light Mandalas（ライトマンダラ）の様々なヒーリングプログラムを提供しています。



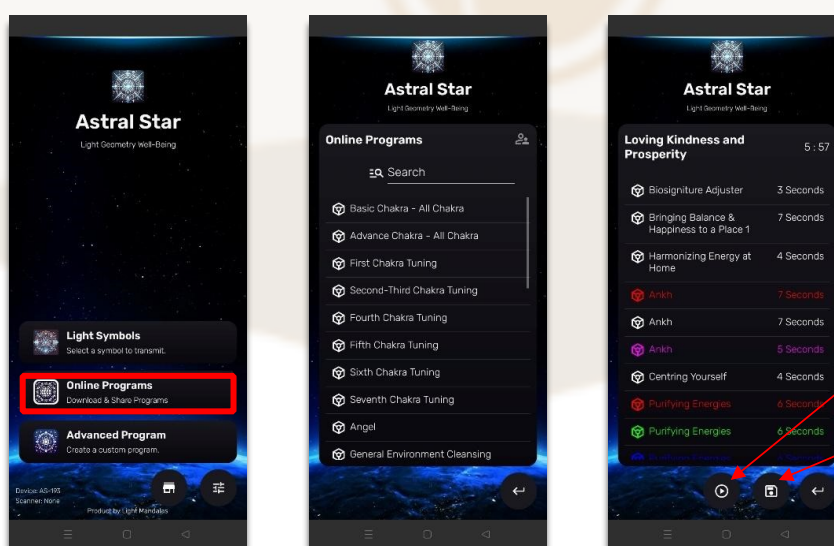


このアイコンをクリックすると、プログラムが再生されます。



ユーザーはプログラムを「お気に入り（またはマイプログラム/program）」に保存することができます。

3.5 アドバンスドプログラム

アドバンスドプログラムでは、ライブラリの周波数やご自身の周波数を使用して、周波数設定をカスタマイズすることができます。複数の周波数を組み合わせて、プリセットやカスタムプログラムを作成することが可能です。

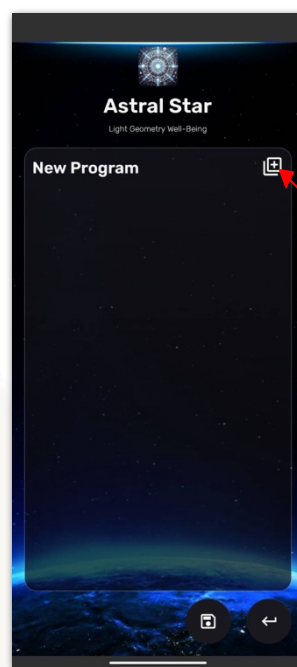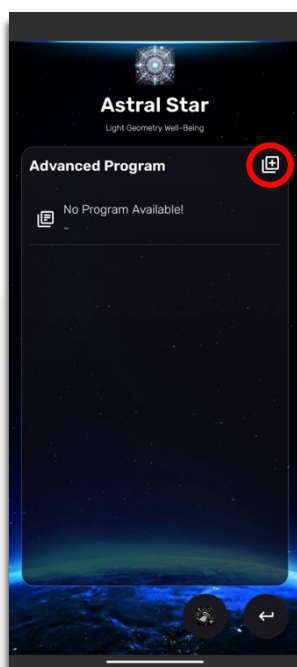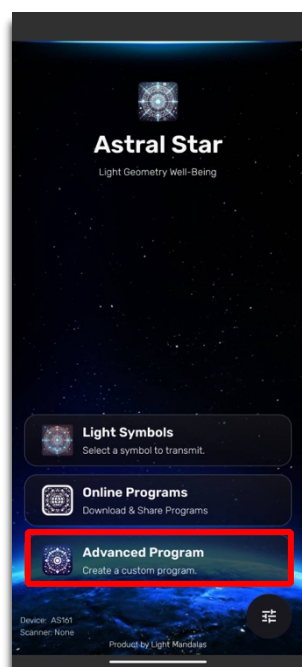


「シンボルライブラリ」から選択するには、この「プラス」アイコンをクリックしてください。

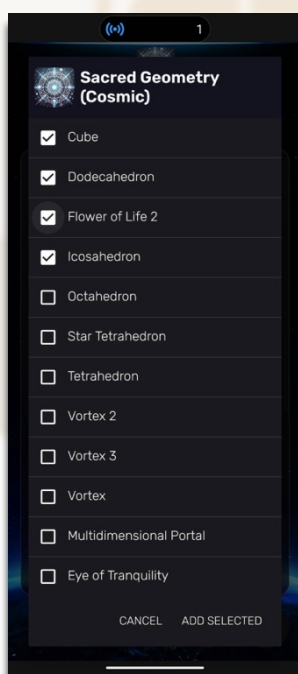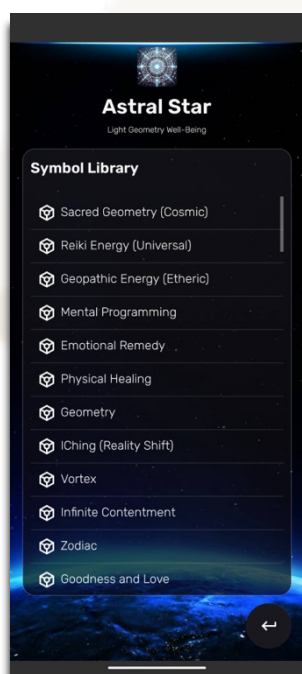

プログラムに追加したいシンボルを選択し、「Add (追加)」をクリックします。


1. プログラムの名前を設定します。

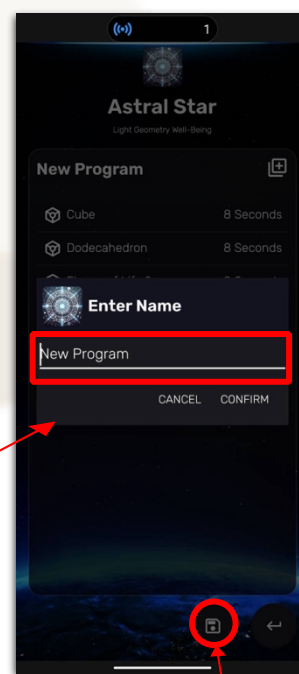

2. このアイコンをクリックしてプログラムを保存します。

3.6 マンダラスキャン


マンダラスキャンを使用するには、まず Bluetooth でペアリングを行います。「設定」アイコンをタップし、「Set up Mandala Scan」を選択して、表示されたシリアル番号を選んで接続してください。

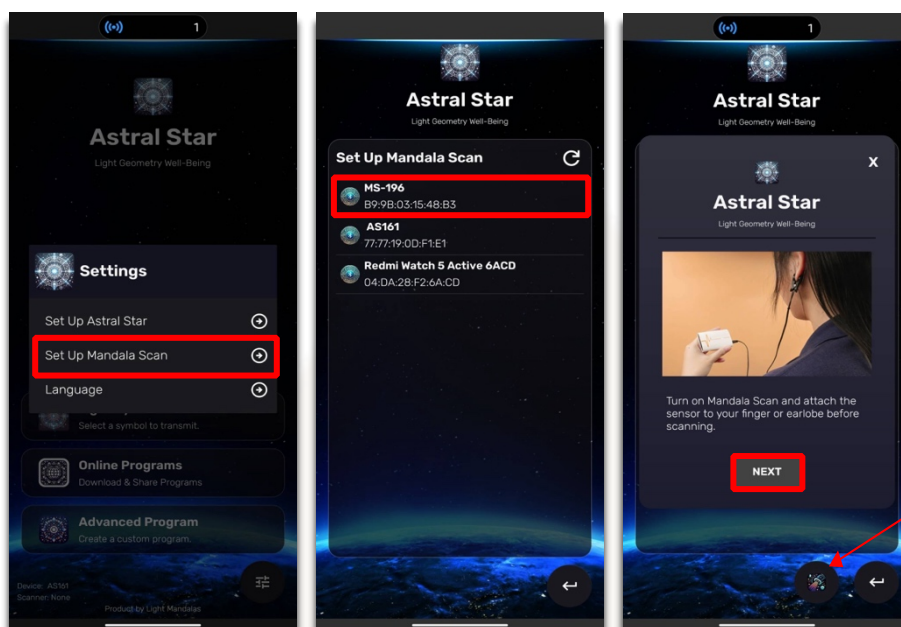

Bluetooth のペアリング完了後、「Advanced Program」を選択し、次に「Mandala Scan」のアイコンを押します。最後に「Next (次へ)」を押してください。

3.6.1 スマートスキャン

マンダラスキャンは、その瞬間にユーザーの身体に最も適した周波数をスキャンし、Astral Star を通じて再生することができます


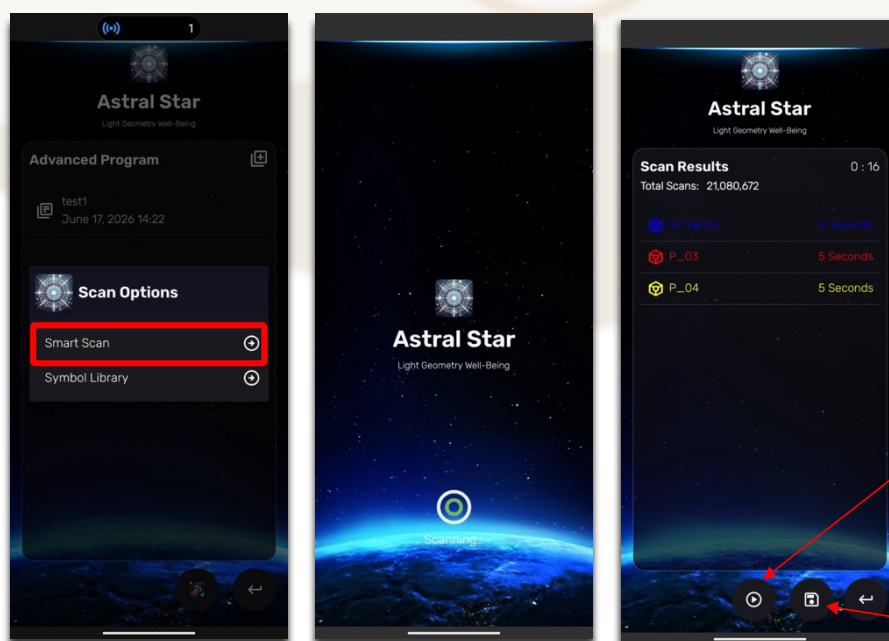


このアイコンをクリックすると、スキャンされたすべての周波数を Astral Star を通じて再生します。



このアイコンを押すと、スキャン結果をプログラムリストに保存できます。

3.6.2 ライブラリ選択

ユーザーは「Scan Options (スキャンオプション)」から好みのカテゴリを選択し、それに基づいて身体をスキャンすることができます。

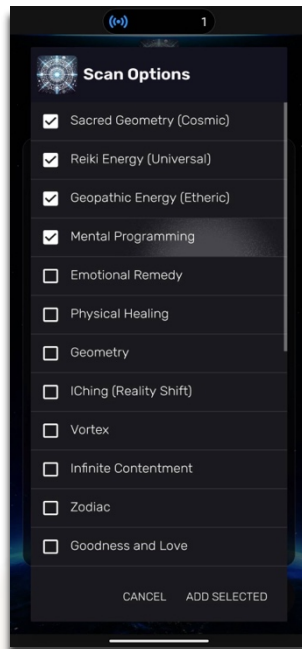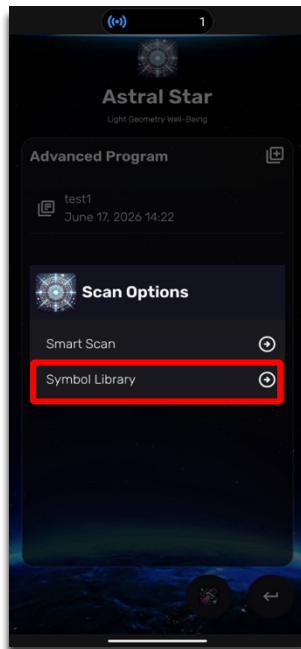

スキャンしたいライブラリを選択し、「Add Selected (選択したものを追加)」をクリックしてスキャンを開始します。

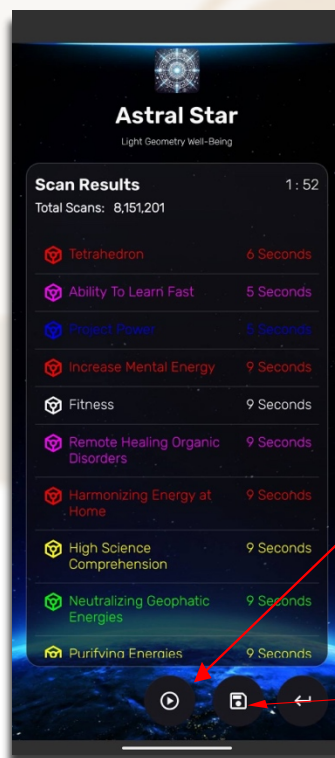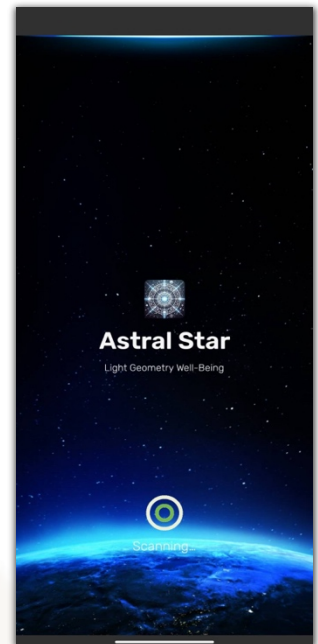

このアイコンをクリックすると、すべてのスキャン結果または周波数を Astral Star を通じて再生します。

このアイコンを押すと、スキャン結果をプログラムリストに保存できます。

トラブルシューティング

電源が入らない場合：

- 供給電源が要求される電圧と一致しているか確認してください。
- オン/オフスイッチが完全にオンになっているか確認してください。
- 電源ケーブルが奥までしっかりと差し込まれているか確認してください。
- ヒューズに損傷がないか確認してください。

レーザーまたはパターンが表示されない場合：

- レーザーライトのスイッチがオンになっていることを確認してください。
- 感度調整ノブを回して、パターンの大きさを調整してください。
- デバイスが Bluetooth 経由でタブレットに接続されているか確認してください。接続されている場合、画面に「APP」と表示されます。

免責事項

Light Mandalas（ライトマンダラ）製品は、リラクゼーション、ストレス管理、およびウェルビーイング（心身の健康）をサポートするためのエネルギーサポートツールとして設計されています。これらは医療機器ではなく、専門的な医療行為や医師の診断・助言に代わるものではありません。

製品の使用に関して共有されるいかなる体験談やお客様の声も、個人の感想であり、同様の効果や結果を保証するものではありません。個人のエネルギー状態や感情の状態はそれぞれ異なるため、敏感に反応したり、一時的に不快感を覚えたりするなど、ユーザーによって体感は異なります。本製品を使用することにより、すべての結果はご自身の責任に帰することに同意したものとみなされます。

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) は、製品の使用から生じる可能性のある、意図しない影響、不快感、または負傷について、一切の責任を負いません。医療に関する懸念がある場合は、製品をご使用になる前に必ず医療専門家にご相談ください。

ご不明な点がございましたら、サポートまでお気軽にお問い合わせください。

Light Mandalas Co., Ltd.（タイ本社）：

- Light Mandalas ウェブサイト：www.light-mandalas.com
- メール：info@light-mandalas.com
- Instagram：@mandalawave9
- YouTube チャンネル：Light Mandalas Official
- TikTok：Light Mandalas
- WeChat：Light Mandalas 光之曼陀罗
- テクニカルサポートメール：cservice@light-mandalas.com