



# 取扱説明書

## マンダラ・ワンド



ツールをご使用になる前に、本マニュアルを必ずお読みください。

バージョン5.2  
2026 年 7 月 2 日更新

## 1. 一般注意事項

### 1.1 製品特長および使用目的

マンダラ・ワンドは、先進的な光療法およびスカラー波技術を用いて、バランスの回復とウェルビーイングの向上を目的とした、洗練されたポータブルウェルネスデバイスです。強力なクォンタムコイルおよびバイフィラコイルにより、身体のエネルギーの流れを調和させ、リラクゼーションと活力の促進をサポートします。

「マンダラ・ワンド」アプリと連携することで、カスタムプリセットの作成およびアップロードが可能となり、個別のエネルギーバランス調整を行うことができます。また、即時使用可能なプリセットプログラムも搭載されています。さらに「マンダラ・スキャン」と統合することで、身体のエネルギー状態を分析し、最適なコヒーレンスプリセットを特定してアップロードすることができます。

お使いのマンダラ・ワンドは厳格な品質テストをクリアしており、いつでもどこでもウェルネスのサポートにご利用いただけます。

### 1.2 製品詳細

- セラピー用ライト周波数モジュレーター
- 電子制御回路を採用
- 出力としてRGB LED、UV-C LED、IRレーザー、バイオレットレーザー、PCBコイル、およびPCBアンテナを使用
- モバイル操作のBluetooth接続に対応
- 3.5mmジャック出力により、デバイス経由で音楽を再生・聴取可能

### 1.3 安全上の警告

- 開封後は、すべての付属品をご確認ください。
- 本マニュアルに記載されたすべての安全上の指示を読み、必ず従ってください。
- レーザーを搭載しているため、動作中の本体を直接見つめないでください。
- 水の近くや湿気の多い場所では使用しないでください。
- 専門技術者以外は分解しないでください。
- ストーブなどの熱源の近くに設置しないでください。
- 本マニュアルに指定された電源のみを使用してください。

### 1.4 保証

- マンダラ・ワンドには、ご購入日から1年間の保証が付いています。
- 不具合が発生した場合は、直ちにカスタマーサポートへご連絡ください。
- 保証は以下による損傷には適用されません：
  - 誤使用または取扱い上の不注意
  - 無断での改造または分解
  - 通関・輸入費用または間接的な損害

- 誤使用による修理が必要な場合、送料を含むすべての費用はお客様のご負担となります。

## 1.5 重要な注意事項

- 本体に損傷が見られる場合は使用せず、サポートへご連絡ください。
- ご使用前に、お住まいの国の電圧が適切であることを必ずご確認ください。
- 初回使用前には、少なくとも1時間30分以上充電してください。
- 本製品を分解・改造しないでください。
- 乾燥した場所で使用してください。雨、高湿度、高温、ほこりを避けてください。

## 1.6 保守・メンテナンス

- しばらく使用していなかった場合は、ご使用前に2時間充電してください。
- お手入れには、柔らかい布または水性ガラスクリーナーをご使用ください。
- 正常な性能を維持するため、デバイスは清潔に保ってください。
- 乾燥した場所に保管し、直射日光を避けてください。
- 問題が発生した場合は、カスタマーサービスへご連絡ください。

## 1.7 はじめに

- 電源を入れるには、ボタンを1回押します。デバイスは基本機能に従って動作を開始します。
- モバイル端末とBluetooth (MW2-XXXX) で接続してください。
- アプリケーションから希望するトリートメントプログラムを選択してください。
- 電源をオフにするには、ボタンを素早く2回押します。デバイスは直ちに動作を停止します。

## 1.8 アドバンス設定

- モードボタンがあり、以下の4つのモードから選択できます : Frequency (周波数)、Basic Program/Preset (基本プログラム/プリセット)、Bluetooth、Audio (音声)。
- セレクトボタンにより、デバイスにアップロードされた基本プログラムおよびプリセットを、全5チャンネルから選択できます。
- スタートボタン
  - 基本プログラムおよびプリセットの動作を開始/停止します。
- アプリケーションについて :
  - 基本プログラムは16グループから選択できます。
  - 周波数モードでは41グループのライブラリから選択できます。
  - 周波数モードでは、1~25MHzの範囲で希望の周波数を入力でき、LEDライトの調整も可能です。
  - マンダラ・スキャンと連携して設定できる機能があります。

- プリセット機能により、ユーザー独自の設定を作成し、最大5つまでマンダラ・ワンドに保存できます。
  - アプリ使用時はBluetoothモードを常時オンにしておく必要があります。
  - 言語設定は全11言語に対応しています。
- いずれかの機能を開始すると、1回の使用につき45分後に自動的に電源がオフになります。

## 1.9 アドバンス設定

- 充電器を取り外した通常使用時には、バッテリー残量を示す4段階のLEDライト（緑、緑、オレンジ、赤）が点灯し、順に100%、75%、50%、25%を示します。
- バッテリー残量がほとんどない場合は、赤色LEDのみが点滅し、残量が10%未満であることを通知します。
- 充電中はデバイスは動作しません。LEDはバッテリー残量に応じて点滅します。

## 1.10 付属品

- マンダラ・ワンド本体
- USB Type-Cケーブル
- マンダラケース
- シンボルスフィア ×1
- 真鍮製クリスタルホルダー



## 2. 技術仕様

### 2.1 仕様

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| 製品名：        | マンダラ・ワンド                      |
| ケースカラー：     | ゴールド                          |
| 材質：         | ABS                           |
| 入力電圧：       | DC 5V                         |
| 充電インターフェース： | USB Type-C                    |
| バッテリー：      | リチウムポリマー 3.7V / 2000mAh       |
| 動作：         | Bluetooth 5.0                 |
| 製品サイズ：      | 57 × 175 × 32 mm（幅 × 高さ × 奥行） |
| 総重量：        | 142g                          |
| 主周波数：       | 1Hz～25MHz                     |



## 2.2 概要および機能



## 2.3 クリスタルスフィアホルダーのセットアップ

ホルダーはマンダラ・ワンドに正確にフィットするよう設計されています。各ホルダーには4つの先端のうち1つにマークが付いています。このマークは、ユーザーがマンダラワンド上部のマグネットを正しく位置合わせして装着するためのガイドとして機能します。



## 2.4 充電設定

1. マンダラ・ワンドを充電するには、USB-Cケーブルを本体と電源アダプターに接続し、その後電源に差し込んでください。
2. 空の状態からフル充電まで約1時間30分かかり、約4時間以上使用できます。（バッテリー容量は使用状況により低下する場合があります。）
3. バッテリー残量が少ない場合はステータスライトが全面赤色に点灯し、フル充電時にはステータスライトが赤・オレンジ・緑で表示されます。



バッテリー寿命を保護するため、過充電は避けてください。

## 2.5 マンダラ・ワンド スクリーン機能

デバイスの電源を入れた後、初期化プロセスが完了するまで数秒お待ちください。

### プリセットリストモード：

ユーザーは作成したカスタムプリセット、またはマンダラ・ワンドにアップロードされた基本プログラムから選択できます。これにより、将来的にはスマートフォンやタブレットを使用せずにプリセットを再生することが可能です。

### 周波数リストモード：


このモードでは、ユーザーは特定の周波数を選択して再生することができます。また、周波数ライブラリからマンダラ・ワンドに周波数をアップロードすることで、将来的にはスマートフォンやタブレットを使用せずに再生することが可能です。

### Bluetoothモード：

アプリとBluetoothでペアリングする前に、「Bluetoothモード」に切り替えてください。このモードはアプリを使用するたびに必ず選択する必要があります、選択されていない場合はデバイスが切断されます。

### オーディオモード：

ヒーリングミュージックを再生する前にオーディオモードに切り替えてください。ユーザーはアプリを通じてマンダラ・ワンドを操作し、タブレットから音楽を再生できます。レーザーおよびスカラー波は音楽と同期してパルス動作します。

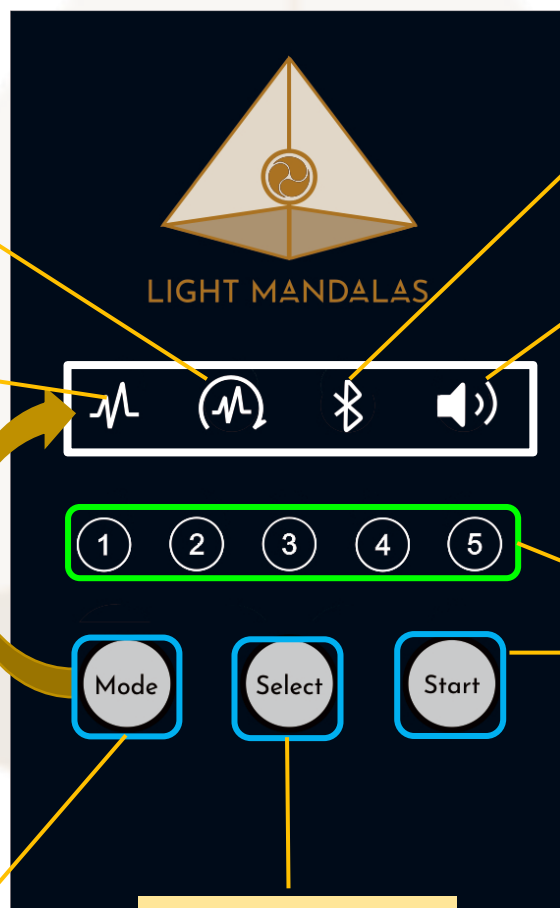

周波数およびプリセッ

スタートはプリセットの再生を開始するための機能です。（プリセトリ

モードは、上記4つのモードを選択するための機能です。


セレクトは、スロット1からスロット5までの周波数プリセットを選択するための機能です。

### 3. マンダラ・ワンドアプリ


#### 3.1 アプリケーション設定

マンダラ・ワンドアプリは、iOSおよびAndroidでご利用いただけます。iOSをご使用の場合はApp Storeから、Androidをご使用の場合はGoogle Playストアからダウンロードしてください。中国国内のユーザーは、<https://light-mandalas.com/application/> からダウンロードしてください。

#### App Store (iOS)

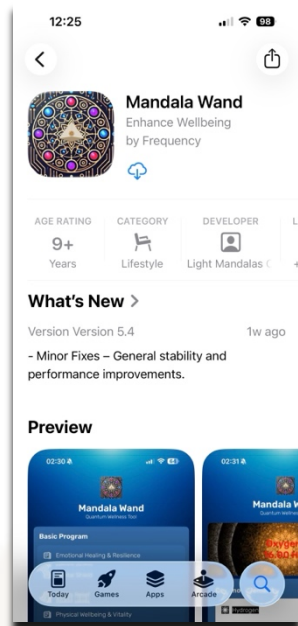


#### Play Store (Android)

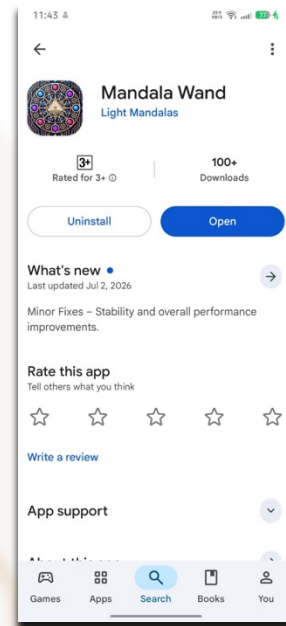


### 3.2 アプリとのBluetoothペアリング

マンダラ・ワンド本体で「Bluetooth」モード  を選択してください。次に、アプリ右下の「設定」アイコンをタップし、「Mandala Wandのセットアップ」を選択します。アプリが近くのデバイスを検索するので、表示されたシリアル番号を選択してBluetoothで接続してください。

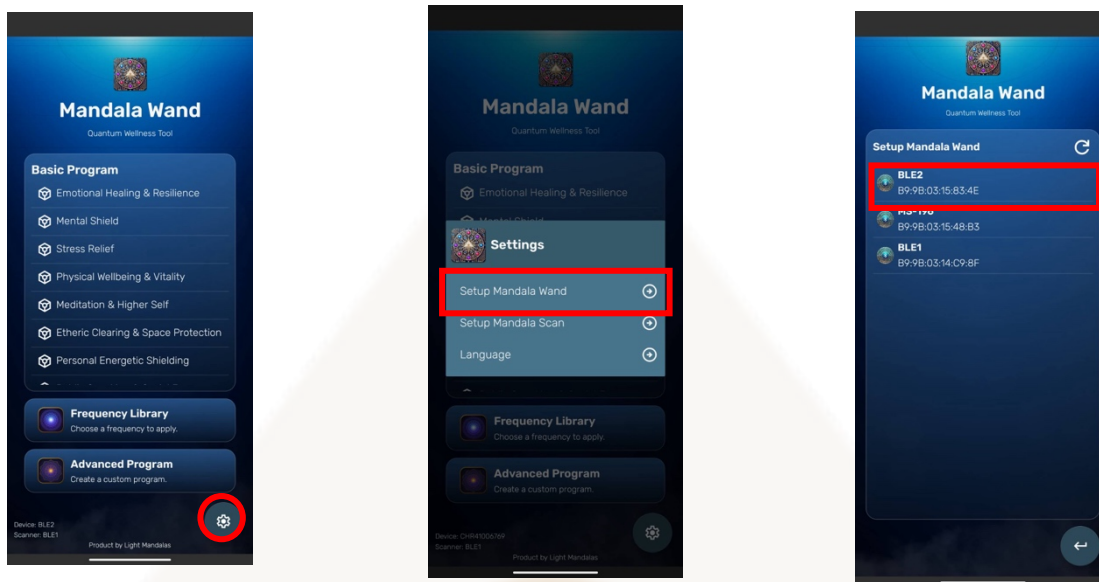

### 3.3 基本プログラム

セットアップ完了後、下図のように「基本プログラム」から希望するプログラムを選択してください。プログラムをそのまま再生するか、またはスロット（1～5）にアップロードして後で使用することができます。

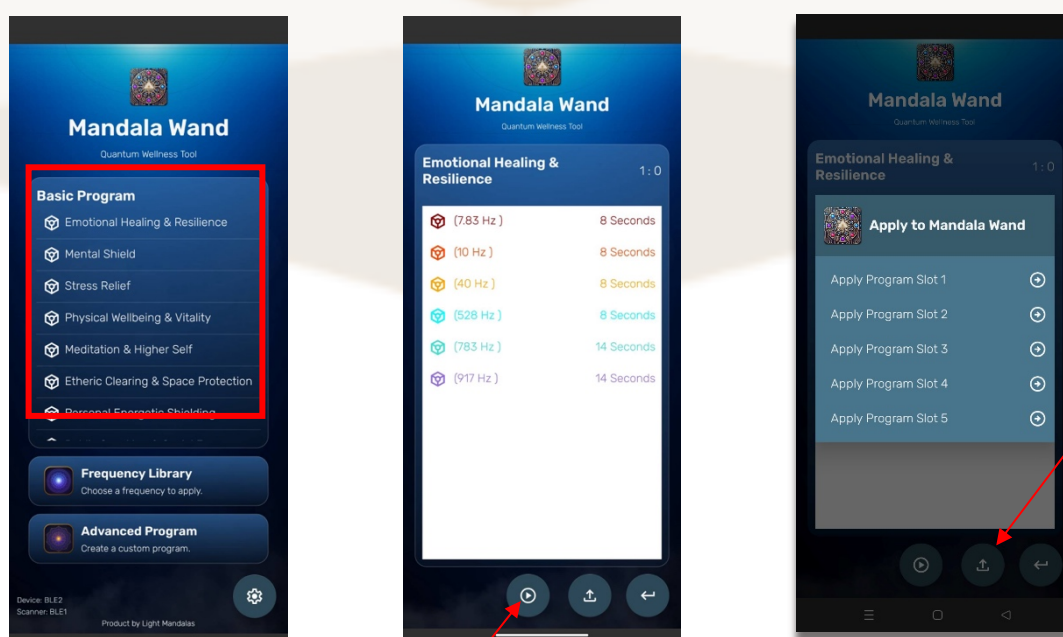


いずれかのスロットを選択して、プリセットをデバイスにアップロードしてください。

このアイコンを押して、プリセットを再生してください。


### 3.4 モードおよびスロットの選択

スロットにアップロードされたプログラムは、アプリを使用せずに再生できます。  
スロットに保存された異なるプログラムを選択するには、以下の手順を行ってください：



1. 「Mode（モード）」を押して、選択したいモードを選びます。スロットにアップロードされた基本プログラムを選択する場合は、「Preset（プリセット）」モードを選択してください。
2. 「プリセット」モードを選択してください。
3. 「Select」を押して、スロット番号を選択してください。
4. 「Select」を押し続けると、ライトが切り替わり、番号が順番に表示されます。
5. 「Start」を押して、プログラムの再生を開始してください。

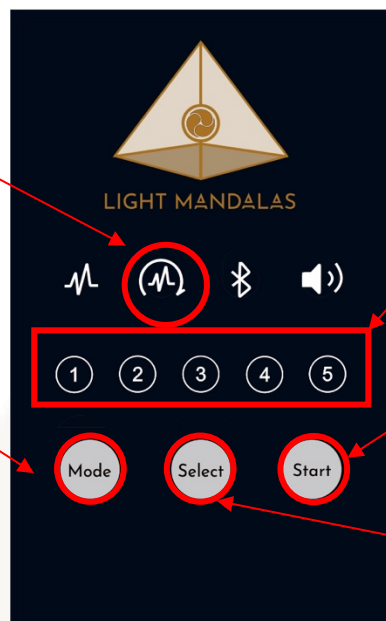

#### 3.4.1 周波数ライブラリ

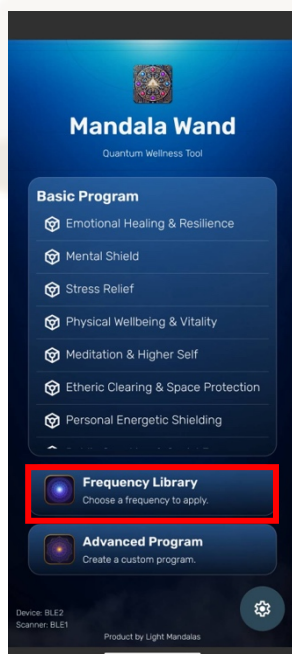

周波数ライブラリから選択できます。

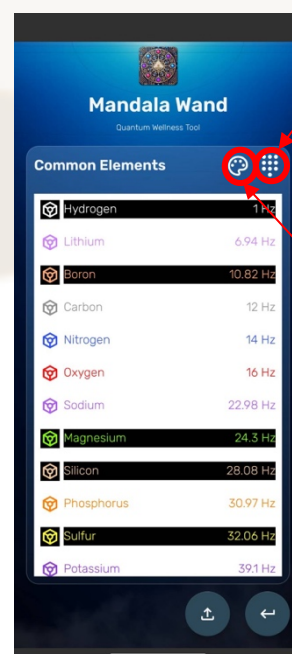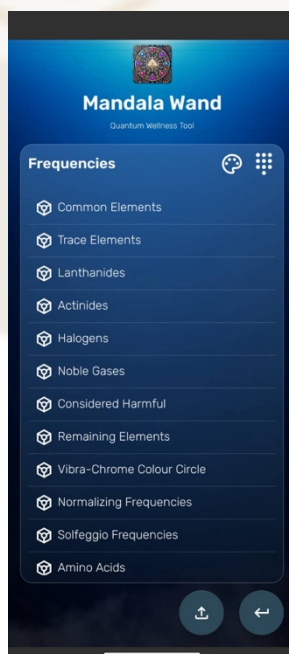

独自の周波数を入力してください。

カスタム周波数の色を選択してください。

### 3.4.2 周波数および周波数カラーを入力


周波数入力



このアイコンを押して、独自の周波数を入力し、「確認」を押してください。

カラーパレットのアイコンを押して、希望の色を選択してください。スライダーで色合いを調整し、「確認」を押してください。




周波数入力

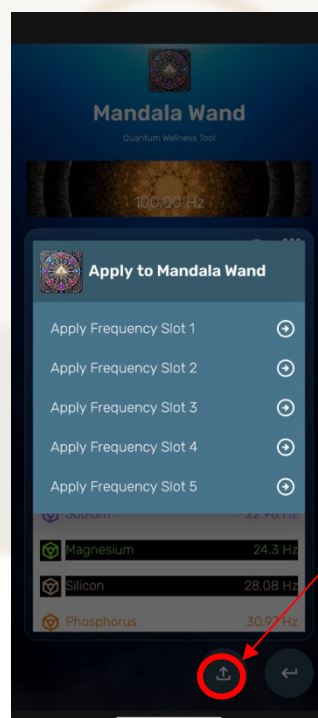



このアイコンを押して、希望の周波数を周波数スロットにアップロードしてください。アップロード後は、オフラインで周波数を再生できます。

### 3.5 アドバンスプログラム


アドバンスプログラムでは、マンダラ・ワンドをマンダラ・スキャンと連携して使用できるほか、ユーザー自身でカスタムプログラムを作成し、色を選択することができます。

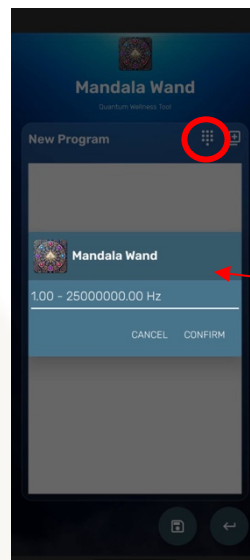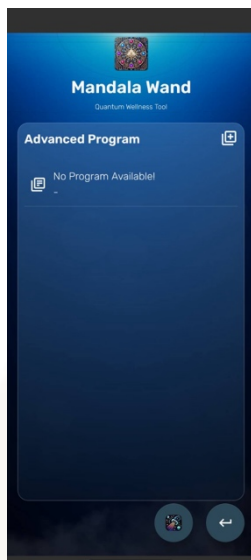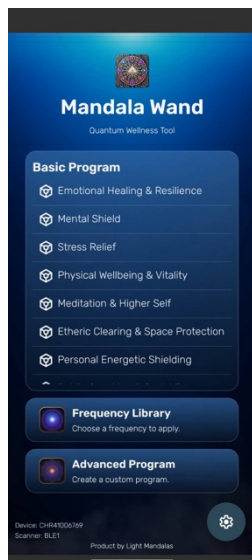

カスタムプログラムに追加する独自の周波数を入力してください。

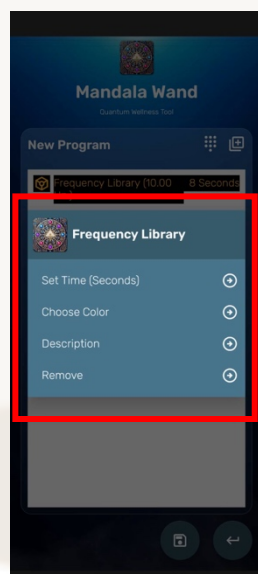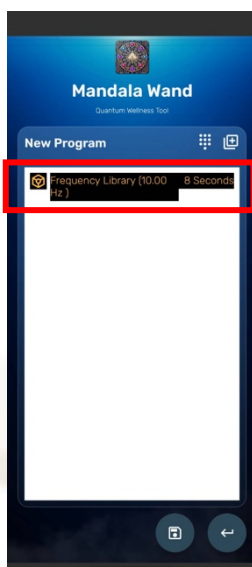

カスタム周波数を選択すると、時間の設定、色の選択、説明の入力、または個別の周波数の削除を行うことができます。

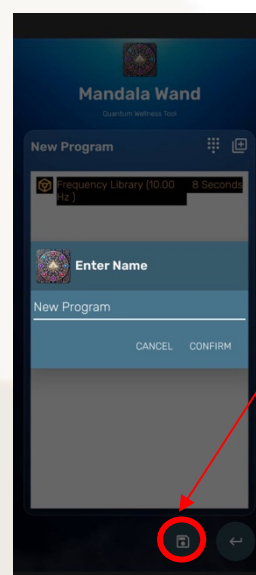

作成したプログラムを保存するには、このアイコンを押してください。プログラムに名前を付けて、「CONFIRM」を押してください。







### 3.5.1 マンダラ・スキャン

マンダラ・スキャンを使用するには、まずBluetoothでペアリングを行います。「設定」アイコンをタップし、「Mandala Scanのセットアップ」を選択し、表示されたシリアル番号を選択して接続してください。



### 3.5.2 スマートスキャン

スマートスキャン機能は、身体に最適な周波数をスキャンします。結果は、現在の身体が必要としている周波数として表示されます。これらの結果は再生したり、マンダラ・ワンドにアップロードすることができます。

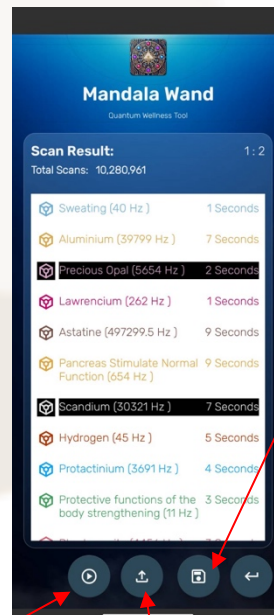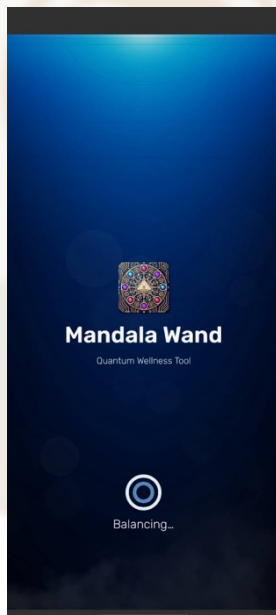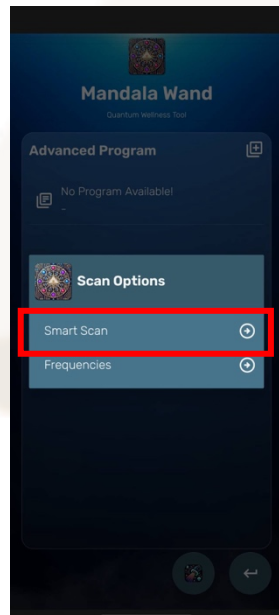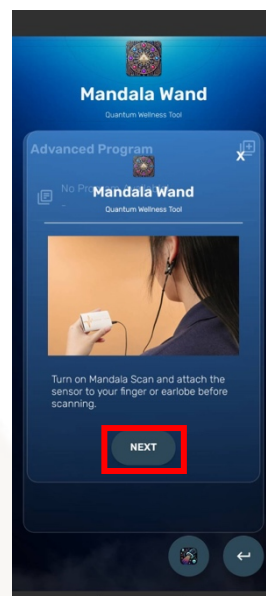
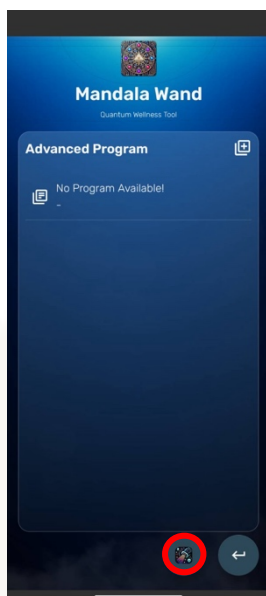
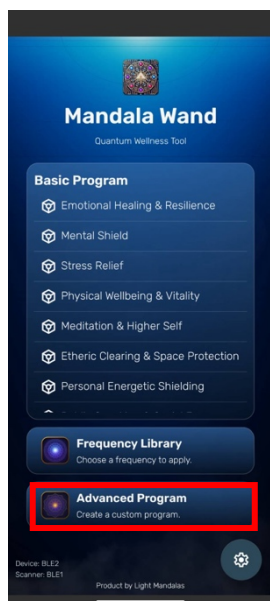


このアイコンを押して、結果をカスタムプログラムとして保存してください。ここでプログラムに名前を付けると、ライブラリページに表示されます。


このアイコンを押して、スキャン結果を再生してください。

このアイコンを押して、スキャン結果をマンダラ・ワンドのスロットにアップロードしてください。


### 3.5.3 周波数スキャン

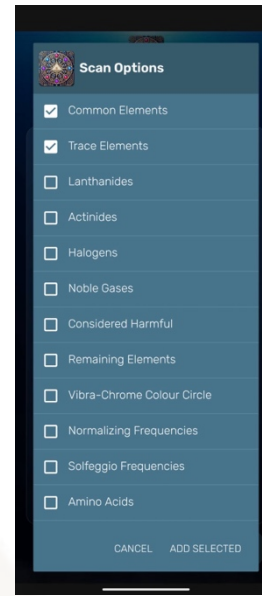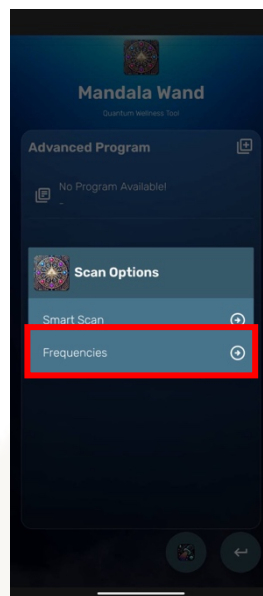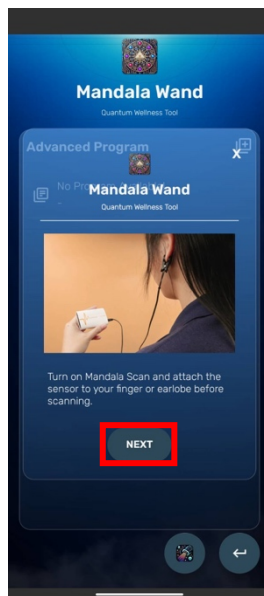

スキャンしたい周波数を選択してください。複数のカテゴリーを追加することもできます。選択後、「選択を追加」を押してください。

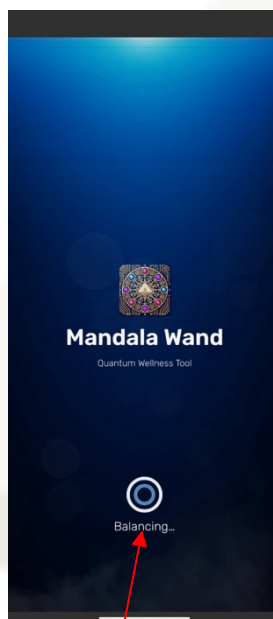

スキャン中は、色が赤から青へ、そして最後に緑へと変化します。

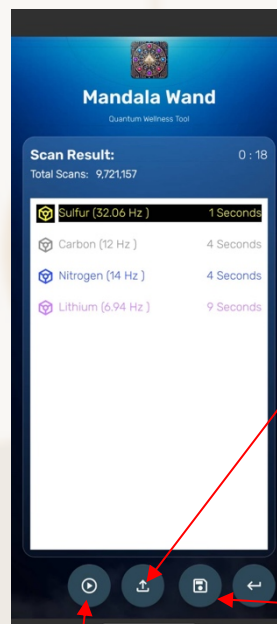


このアイコンを押して、スキャン結果をマンダラ・ワンドのスロットにアップロードしてください。

このアイコンを押して、結果をカスタムプログラムとして保存してください。ここでプログラム名を入力すると、ライブラリページに表示されます。

このアイコンを押して、スキャン結果を再生してください。

### 3.5.4 カスタムプログラム

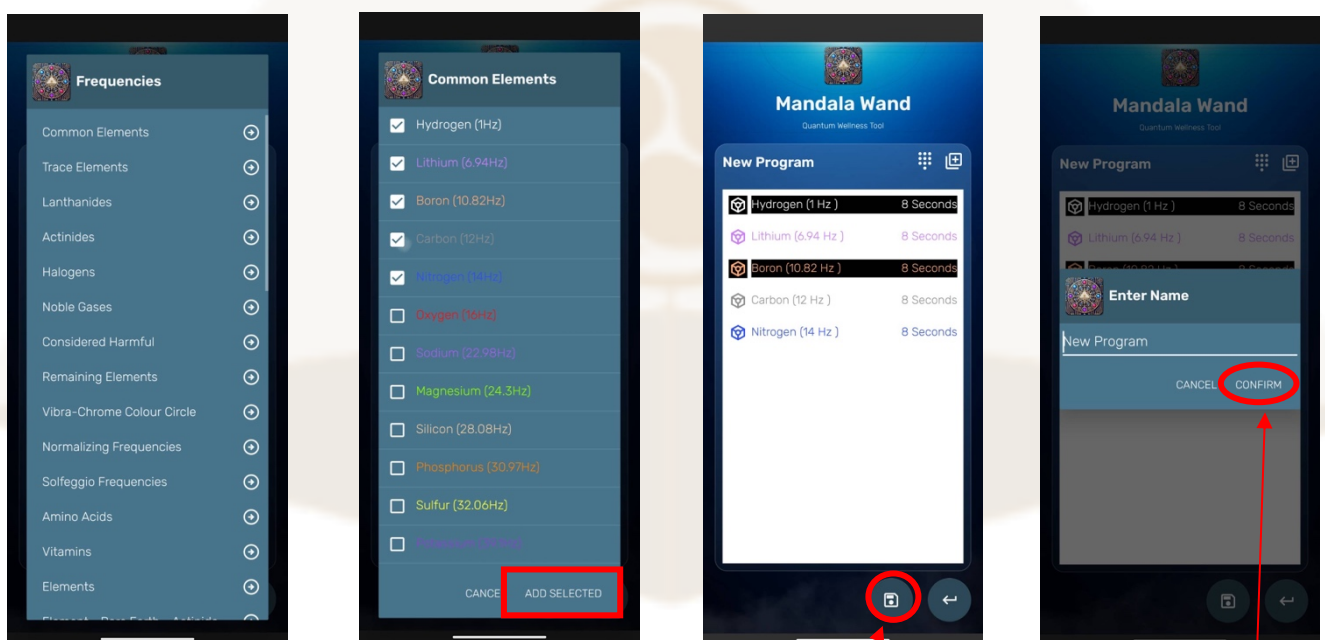


これは周波数リストです。希望する周波数を選択し、「選択を追加」を押してください。

このアイコンをクリックして、作成したカスタムプログラムを保存してください。

カスタムプログラムの名前を入力し、「確認」を押してください。

### 3.6 オーディオ周波数

デバイスの画面でオーディオモードに切り替えてください。ヘッドホンまたはスピーカーをマンダラ・ワンドに接続し、Bluetooth設定でマンダラ・ワンドのオーディオBluetoothとペアリングします。「XFW-BT」を選択して接続してください。ヘッドホンから通知音が聞こえたら、任意の音楽プラットフォームからヒーリングミュージックの再生を開始できます。パルスするカラーを確認できるように、音量は十分に上げてご使用ください。

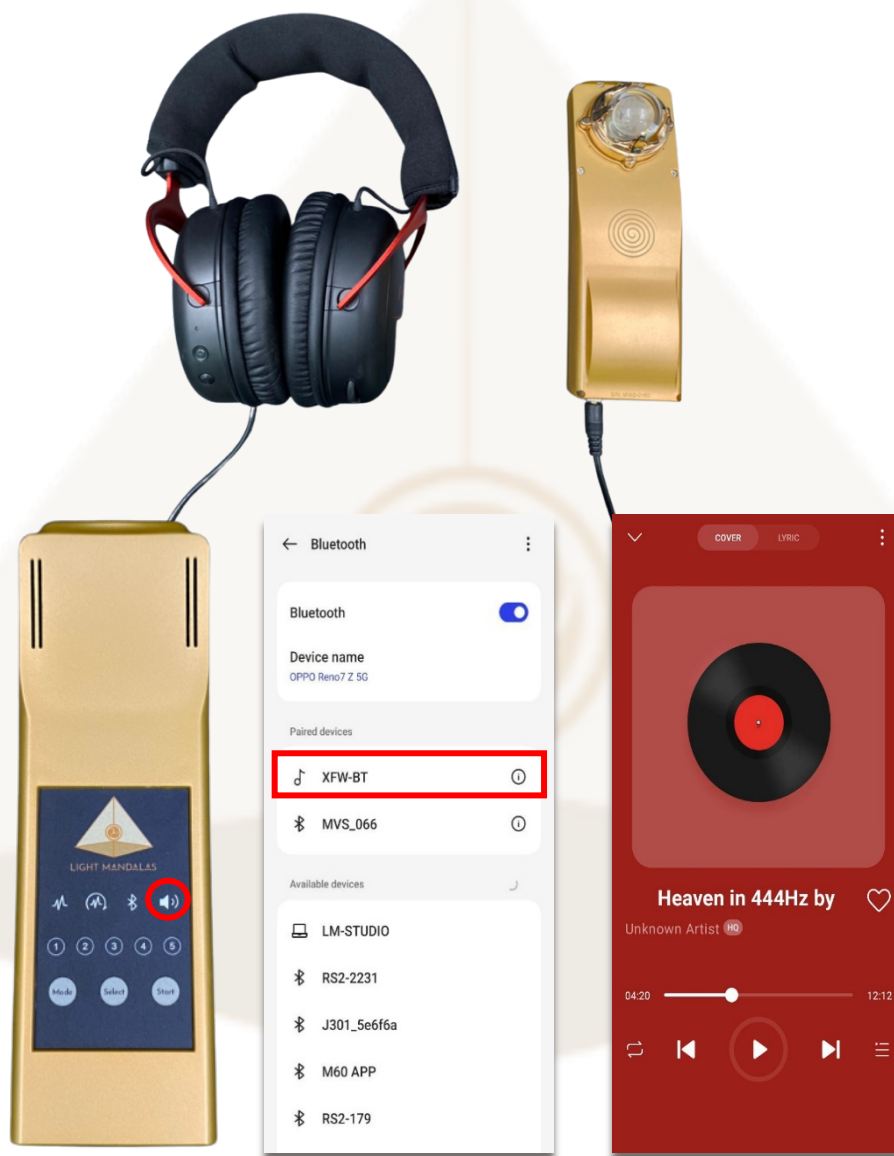

## 故障時の対処方法

### 電源が入らない場合

- バッテリー残量が低下しています。デバイスを充電してください。

### アプリケーションに接続できない場合

- マンダラ・ワンドの画面がBluetoothモードになっていることを確認してください。



## 免責事項

Light Mandalas製品は、リラクゼーション、ストレスマネジメント、およびウェルビーイングをサポートするためのエネルギーサポートツールとして設計されています。これらは医療機器ではなく、専門的な医療行為、診断、治療、または医療アドバイスに代わるものではありません。

当社製品の使用に関する体験談やお客様の声は、個人の感想および反応を示すものであり、特定の結果を保証するものではありません。エネルギー状態や感情状態には個人差があるため、使用によって感じ方が異なり、感受性の高まりや不快感を感じる場合があります。本製品の使用により生じるあらゆる結果は、すべてユーザーご自身の責任となります。

Light Mandalas Co., Ltd. (タイ) は、本製品の使用に起因して生じるいかなる予想しない影響、不快感、または損害についても責任を負いません。健康上の懸念がある場合は、ご使用前に必ず医療専門家へご相談ください。

ご不明な点がございましたら、サポートまでお気軽にお問い合わせください。

Light Mandalas Co., Ltd. (タイ本社) :

- Light Mandalasウェブサイト : [www.light-mandalas.com](http://www.light-mandalas.com)
- メール : [info@light-mandalas.com](mailto:info@light-mandalas.com)
- Instagram : @mandalawave9
- YouTubeチャンネル : Light Mandalas Official
- TikTok : Light Mandalas
- WeChat : Light Mandalas 光之曼陀罗
- テクニカルサポートメール : [cservice@light-mandalas.com](mailto:cservice@light-mandalas.com)