



คู่มือการใช้งาน

Light Alchemy AuraSync



กรุณาอ่านคู่มือก่อนการใช้งาน

เวอร์ชัน 4.8

อัปเดตล่าสุด 6 มิถุนายน 2569

1. ข้อควรทราบทั่วไป

1.1 คุณสมบัติและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

Light Alchemy AuraSync เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่นวัตกรรมใหม่ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสมดุลของพลังงานและลดความเครียดผ่านการบำบัดด้วยสีเชิงควอนตัม ด้วยการให้เลเซอร์สีได้ถึง 16 ล้านแบบ ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ อุปกรณ์นี้ใช้หลักการบำบัดด้วยสเปกโทรสโกปีเพื่อปรับการไหลเวียนพลังงานของร่างกาย ช่วยเพิ่มการผ่อนคลายและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม

อุปกรณ์นี้ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Light Alchemy ซึ่งช่วยให้คุณสร้างโปรไฟล์ที่ปรับแต่งเองสมดุลพลังงานส่วนตัว แอปยังรวมความถี่ที่โปรแกรมไว้ล่วงหน้ามากกว่า 700 รายการสำหรับการใช้ทันที นอกจากนี้ การผสานการทำงานกับ Mandala Scan ยังช่วยวิเคราะห์สถานะพลังงานของร่างกายเพื่อระบุโปรไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Light Alchemy AuraSync ของคุณผ่านการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด และพร้อมสนับสนุนการเดินทางสู่สุขภาพที่ดีของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสง เพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ
- ใช้ Jack Output 3.5 mm. (Audio) เพื่อสามารถฟังเสียงเพลงผ่านตัวเครื่อง
- ใช้ Jack Output 3.5 mm. 2 ช่อง (Slave, Master) เพื่อสามารถต่อพ่วง Mandala Light Alchemy ได้มากกว่า 1 ตัวขึ้นไป
- ใช้ Jack Output 3.5 mm. ด้านหน้าเครื่อง เพื่อต่อกับอุปกรณ์วัดสัญญาณชีพจร

1.3 ข้อเตือนด้านความปลอดภัย

- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้หน้าหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ

- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- Light Alchemy AuraSync ของคุณมีการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทันที
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจาก:
 - การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย
 - การดัดแปลงหรือการแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
- หากต้องการซ่อมแซมเนื่องจากใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้อุปกรณ์หากพบว่าชำรุด กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าเหมาะสมกับประเทศของคุณก่อนใช้
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงอุปกรณ์
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงน้ำ ความชื้นสูง ความร้อน และฝุ่น

1.6 การบำรุงรักษา

- ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกสำหรับทำความสะอาด
- ดูแลอุปกรณ์ให้สะอาดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 การเริ่มต้นใช้งาน

- เสียบปลั๊ก สายไฟ 220 V AC และ กดปุ่มเปิดตรงสวิตช์สีแดงด้านหลังเครื่อง
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: LAS-XXXX
- เลือกโปรแกรบบำบัดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มปิดตรงสวิตช์สีแดงด้านหลังเครื่อง

1.8 การตั้งค่าพิเศษ

- มีปุ่ม Mode ให้กดเลือกโหมด โดยมีอยู่ 5 โหมด คือ Bluetooth Mode, Audio Mode, Microphone Mode, Bio Feedback และ Light Scan Mode
- Bluetooth Mode: โหมดเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง Light Alchemy จะเชื่อมต่อกับแอป พลิกเคชั่นเพื่ออัปเดตโปรแกรมล่าสุดได้ทันที
- Audio Mode: แสงจะกะพริบตามจังหวะเสียงเพลงในสมาร์ทโฟน โดยเราจะต้องเชื่อมต่อกับ Bluetooth ของ Audio ไปด้วย และยังสามารถฟังเสียงเพลงโดยเสียบแฉีก 3.5 มม. ตรงช่อง Audio ด้านหลัง และยังมีโวลุ่มด้านหลังเครื่องที่ทำหน้าที่ปรับการตอบสนองของแสงต่อระดับ เสียงเพลง
- Microphone Mode: แสงจะกะพริบตามจังหวะเสียงภายนอกบริเวณโดยรอบ ซึ่งสามารถหมุนปรับโวลุ่มด้านหลังเครื่องที่ทำหน้าที่ปรับการตอบสนองของแสงต่อเสียงภายนอก
- Bio Feedback Mode: ฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่ตรวจจับชีพจรเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล และจะฉายแสงสี แดง เขียว น้ำเงิน เพื่อบอกสถานะความคงที่ของชีพจรในช่วงเวลานั้น ๆ ส่วนด้านหลังเครื่องจะมี LED สีน้ำเงินกะพริบบอก จังหวะของสัญญาณชีพจร
- Light Scan Mode: ฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่ตรวจจับชีพจรเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผล และจะฉายแสงและความถี่สำหรับบำบัดให้เหมาะสมกับสถานะความคงที่ของชีพจรในช่วงเวลานั้น ๆ ส่วนด้านหลังเครื่องจะมี LED สีน้ำเงินกะพริบบอก จังหวะของสัญญาณชีพจร
- ในแอปพลิกเคชั่น จะมี
 - Basic Program จำนวน 16 โปรแกรมให้เลือกใช้งาน
 - Color Library ฟังก์ชันที่ใส่เลขความถี่ที่เราต้องการ ตั้งแต่ 1- 25MHz และสามารถปรับสีของแสงได้ตามต้องการ
 - Advanced Program ที่ให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า หรือ สร้าง Program ของตัวเองได้
 - ฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าผ่าน Mandala scan ได้
 - ฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าภาษาได้ ทั้งหมด 11 ภาษา
- รูช่อง USB-C ด้านหลังตัวเครื่อง มีไว้สำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ ของตัวเครื่องโดยเฉพาะ

1.9 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

- Light Alchemy AuraSync
- สายไฟ 220 V AC
- สายคิปลิงสำหรับวัดสัญญาณชีพจร 1 ชิ้น
- ชุดค่าตั้งสแตนด์เลส
- กล่องแพ็คเกจ




2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 รายละเอียดคุณสมบัติ

ชื่อสินค้า:	Light Alchemy AuraSync
สี:	สีขาว
วัสดุ:	อะลูมิเนียม เหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุฐาน:	อะลูมิเนียมและยาง
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า:	220V AC
อายุการใช้งานของ LED:	100,000 ชั่วโมง
กำลังไฟ:	100W
ความถี่:	1 Hz – 25MHz
แหล่งกำเนิดแสง:	12 ดวง, 10W จำนวน(RGB)
ตัวหรี่ไฟ:	ตัวหรี่ไฟเชิงเส้น 0-100%
การเชื่อมต่อ:	Bluetooth Audio Bluetooth, Microphone Module, Bluetooth 5.0
ขนาดสินค้า:	240 x 230 x 90 mm (กว้าง x สูง x ลึก)
น้ำหนักรวม:	1.5 กก.

2.2 ภาพรวมและการทำงาน

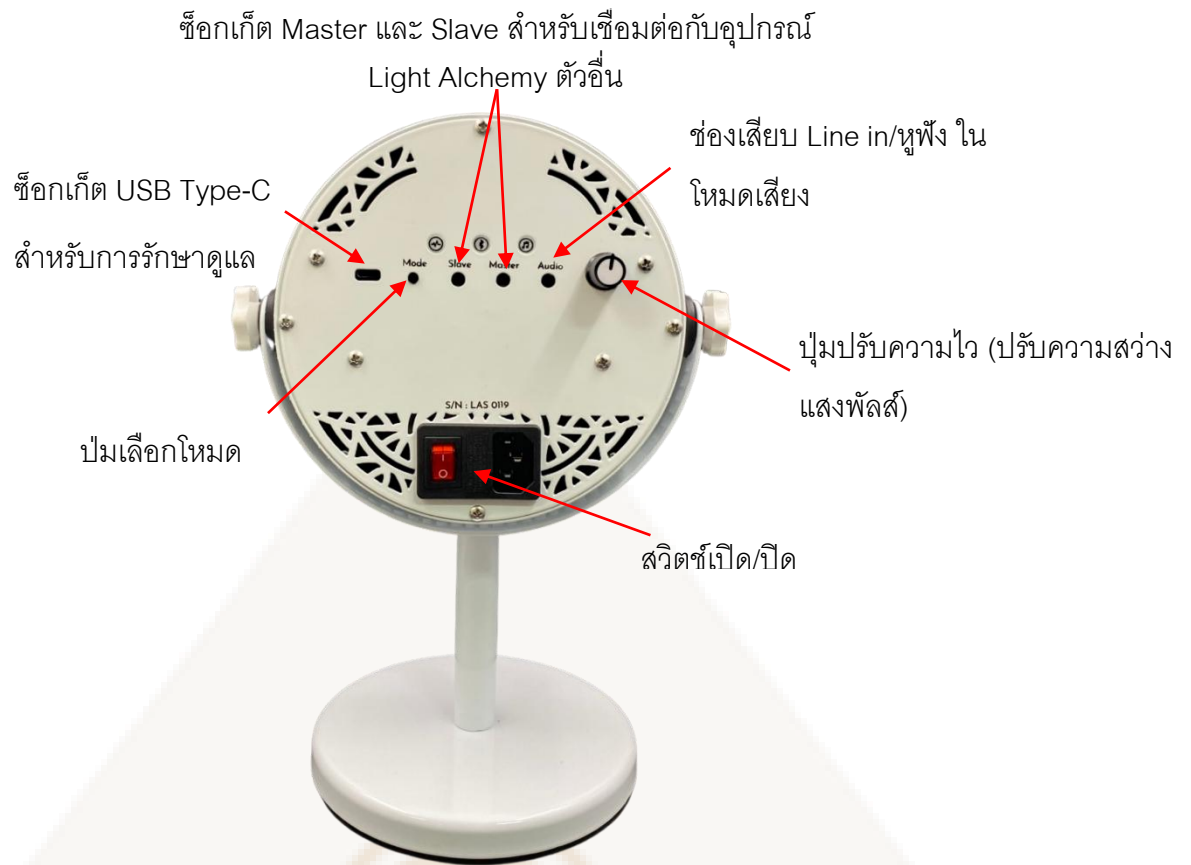

2.3 การตั้งค่าอุปกรณ์

เสียบสายไฟ (เฉพาะ AC 110-220V, 50/60 Hz) ให้แน่น จากนั้นเปิดสวิตช์ไฟ LED จะกระพริบในช่วงกระบวนการเริ่มต้นระบบ



2.4 โหมดโปรแกรม

1. **โหมดบลูทูธ (Bluetooth Mode)** - โหมดเริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง Light Alchemy เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเพื่ออัปเดตโปรแกรมบังคับได้ทันที

2. โหมดเสียง (Audio Mode) - ทำงานร่วมกับลำโพงหรือหูฟัง ไฟจะทำงานสอดคล้องกับจังหวะดนตรี สร้างประสบการณ์ที่สมจริง

3. โหมดลำโพง (Microphone Mode) - ระบบจะตอบสนองต่อเสียงเพลงจากแหล่งภายนอก โดยแสดงเอฟเฟกต์แสงตามจังหวะ

4. โหมดไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback Mode) - ออกแบบสำหรับผู้ชอบนั่งสมาธิและปฏิบัติธรรม ใช้สีแสดงสถานะของจิตใจ:

-  แดง - ความเครียดสูง
-  น้ำเงิน - อยู่ในช่วงปรับสมดุล
-  เขียว - ความสมดุลในระดับที่ดีที่สุด


5. โหมดสแกนแสง (Light Scan Mode) - หนีบเซนเซอร์ที่หู แล้ว Light Alchemy จะวิเคราะห์สภาพร่างกายและสร้างแสงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้นี้

3. แอปพลิเคชัน Light Alchemy


3.1 การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

แอป Light Alchemy พร้อมให้บริการบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store สำหรับ iOS และ Google Play Store สำหรับ Android สำหรับผู้ใช้ในประเทศจีน กรุณาดาวน์โหลดที่: [Light Mandalas Applications & Downloads](#)

App Store (iOS)


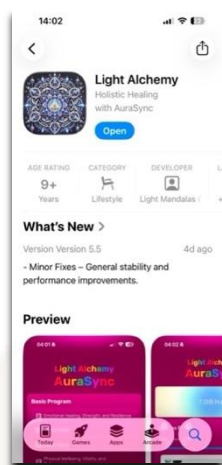


Play Store (Android)

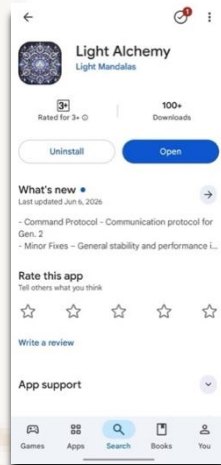




3.2 การจับคู่บลูทูธกับแอปพลิเคชัน

แตะไอคอน "Settings" ที่มุมขวาล่าง จากนั้นเลือก "Set up Light Alchemy" แอปพลิเคชันจะทำการค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง ให้เลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ.

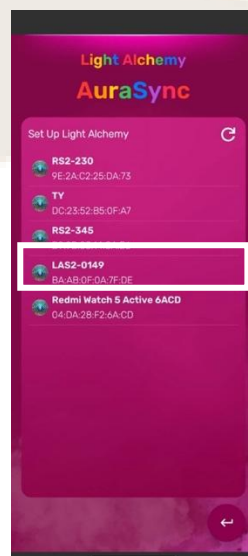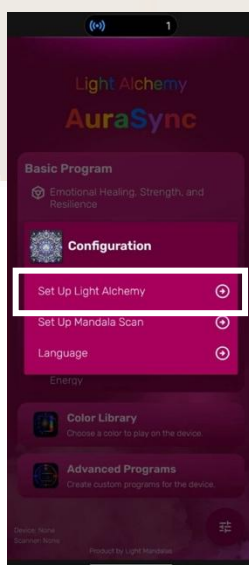

3.3 Basic Program

หลังจากการตั้งค่าแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการภายใต้เมนู “Basic Program”

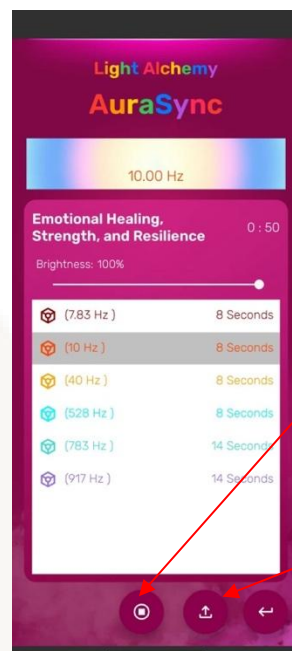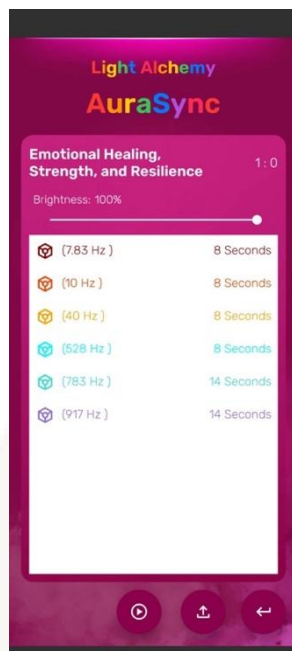
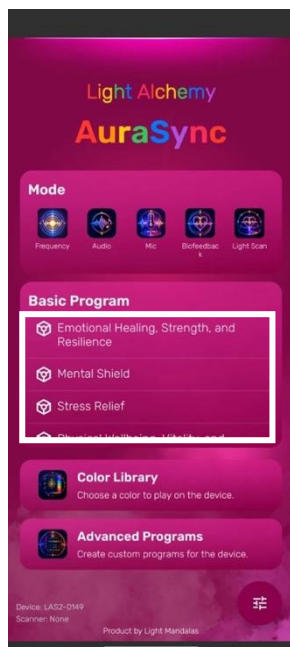


คลิกไอคอน “Play” เพื่อเริ่มเล่นความถี่

คลิกปุ่ม “Upload” เพื่อส่งความถี่ไปยัง Light Alchemy

3.4 Color Library

ความถี่ทั้งหมดถูกรวมไว้ในไลบรารีเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกความถี่และสีที่ต้องการทดลองใช้งานได้.




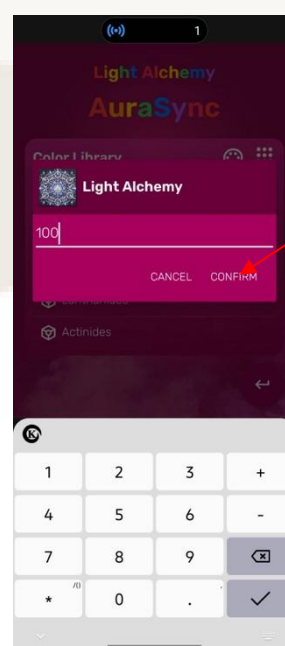
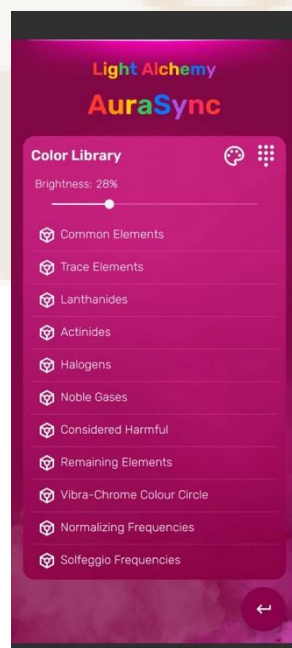


ใส่ความถี่ที่คุณต้องการ จากนั้นกด “ยืนยัน”

3.5 Advanced Program

"Advanced Program" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าความถี่โดยใช้ไลบรารีหรือตั้งค่าความถี่ส่วนตัว และสามารถรวมความถี่ต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง Program ส่วนตัวของตัวเอง


3.5.1 Advanced Program - Library

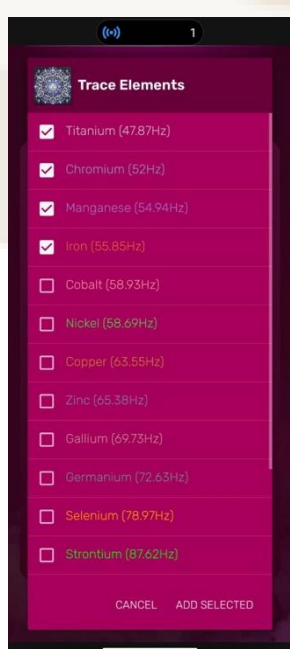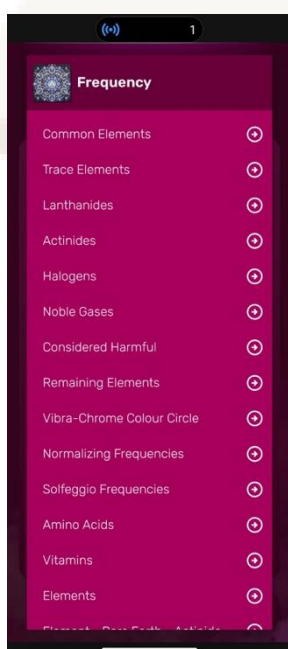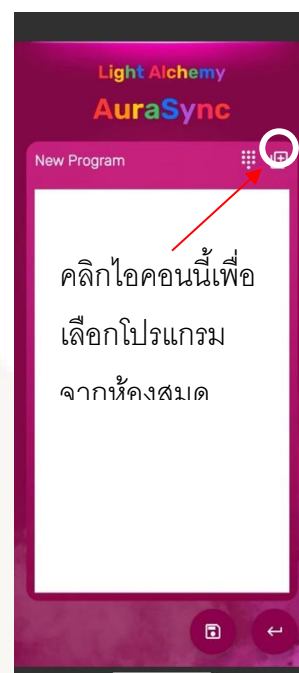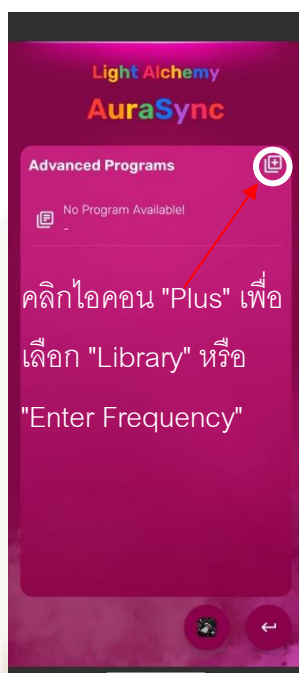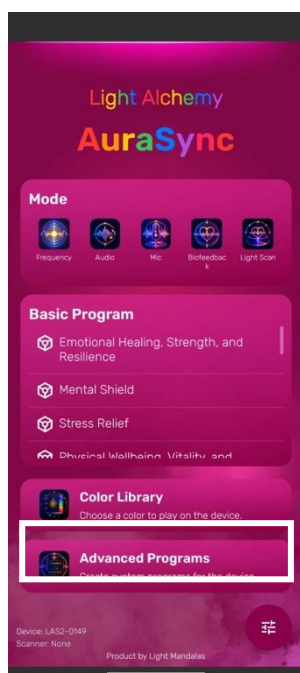


1. เลือกความถี่ที่ต้องการเพิ่มเข้าไปใน

2. ตั้งชื่อโปรแกรมที่คุณกำหนดเองแล้วกด "ยืนยัน"

3. ตั้งชื่อสำหรับ Program ใหม่

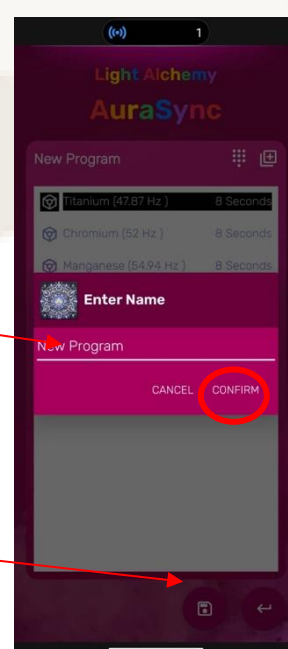


3.5.2 Enter Frequency

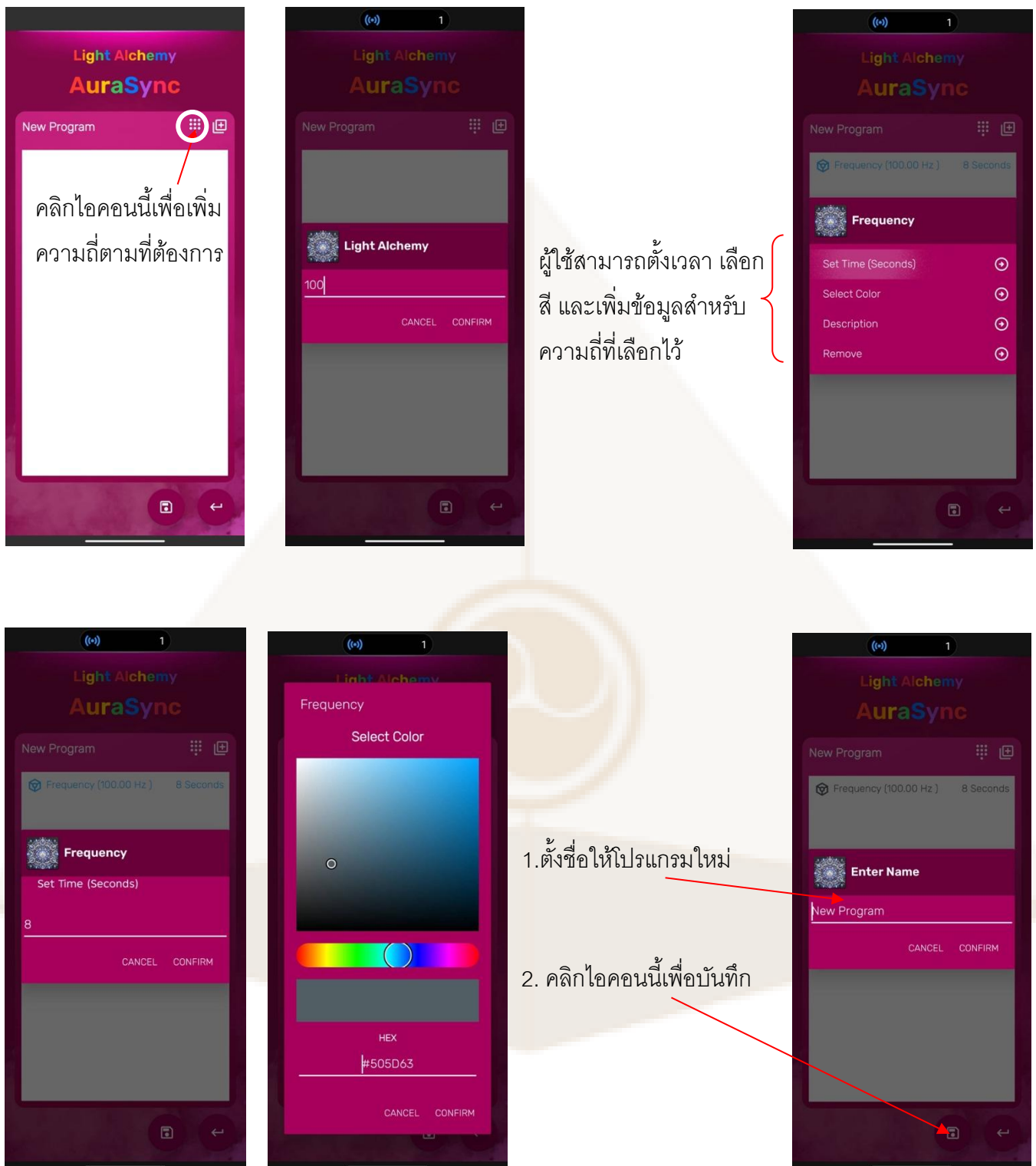



3.6 Mandala Scan

ในการใช้งานกับ Mandala Scan ให้ทำการจับคู่อุปกรณ์ผ่านบลูทูธก่อน โดยแต่ละไอคอน "Settings" เลือก "Setup Mandala Scan" แล้วเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อ

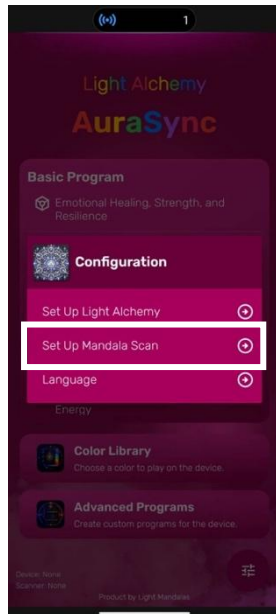

เลือก "Advanced Programs" แล้วกดไอคอน "Mandala Scan" หลังการจับคู่บลูทูธเสร็จสิ้น
ท้ายที่สุด กด "Next" เพื่อเริ่มการสแกน

3.6.1 Smart Scan

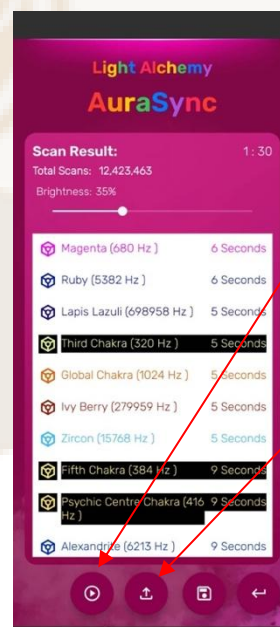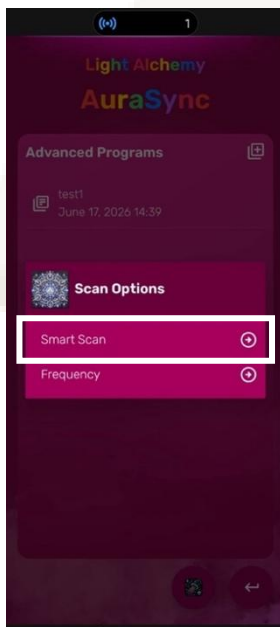

คลิกไอคอน "Play" เพื่อเริ่มเล่นความถี่

คลิกไอคอน "อัปโหลด" เพื่อส่งผลการสแกนไปยัง Light Alchemy
วิธีนี้จะช่วยให้เครื่องยังคงเล่นต่อไปได้แม้หลังจากปิด



3.6.2 Scan Frequency





3.7 Audio Mode



เสียบหูฟังหรือลำโพงเข้ากับ Light Alchemy เพื่อเล่นเพลงไปพร้อมกับโปรแกรมความถี่ โดย ไฟจะ
กระพริบตามจังหวะความถี่ของเสียงเพลง จากนั้นเชื่อมต่อบลูทูธเสียงของ Light Alchemy ผ่านการ ตั้ง
ค่าบลูทูธโดยเลือก 'XFW-BT' เมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนการเชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถเล่นเสียงบำบัดบน
แพลตฟอร์มอื่นได้

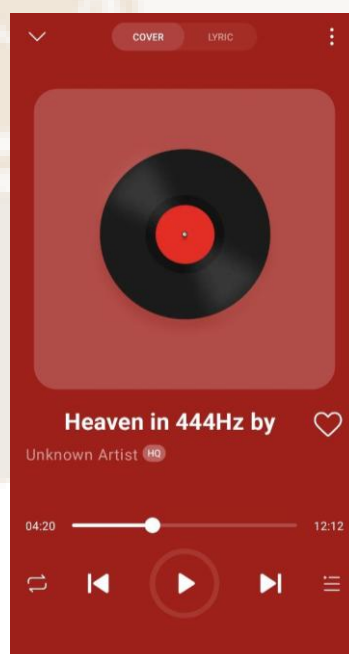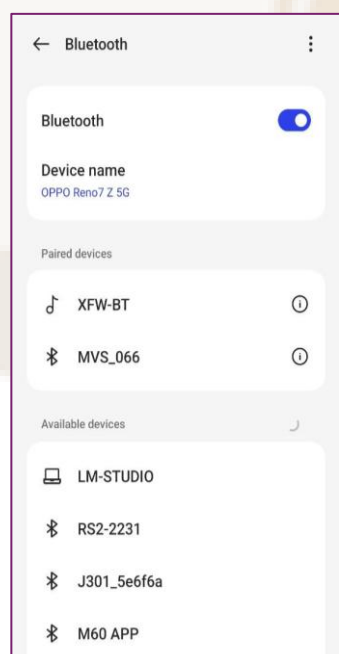

3.8 โหมดไบโอฟีดแบ็ค (Biofeedback Mode)

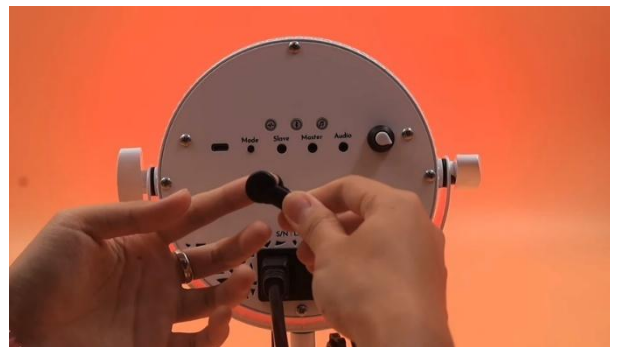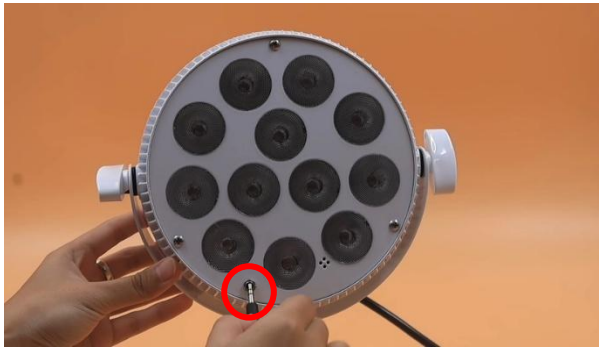

เริ่มต้นด้วยการเสียบคลิปหนีบหูเข้ากับด้านหลังของตัวเครื่อง Light Alchemy AuraSync หลังจากนั้น หนีบคลิปไว้ที่ปลายนิ้ว อุปกรณ์จะเริ่มประมวลผลของสภาพจิตใจของคุณ รูปภาพความถี่ช้าที่สุดด้านบนจะกะพริบตามจังหวะการเต้นของหัวใจ เพิ่มเติม Light Alchemy AuraSync จะฉายแสงสีที่สะท้อนถึงสภาพจิตใจของคุณ ทำให้คุณเข้าใจร่างกายและสภาวะของตัวเองมากขึ้น

- แดง - ความเครียดสูง
- น้ำเงิน - อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง ปรับสมดุล
- เขียว - ความสมดุลในระดับที่ดีที่สุด

3.9 โหมดสแกนแสง (Light Scan Mode)

เช่นเดียวกันกับโหมดไบโอฟีดแบ็ค เสียบที่หนีบหูเข้ากับช่องเสียบด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วหนีบคลิปไว้ที่ปลายนิ้ว โหมดนี้จะช่วยค้นหาความถี่และแสงสีที่เหมาะสมที่สุดที่ร่างกาย ของคุณต้องการ รูปภาพความถี่ช้าที่สุดด้านบนจะกะพริบระหว่างที่ประมวลผล



ข้อผิดพลาดและวิธีการแก้ไข

ไม่มีไฟ

- ตรวจสอบปลั๊กไฟว่าเสียบเข้าอย่างสมบูรณ์แล้ว
- ลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เพื่อรีเซ็ตระบบ

ไฟไม่ทำงาน

- ตรวจสอบการตั้งค่าบลูทูธบนแท็บเล็ตว่าอุปกรณ์จับคู่แล้วหรือไม่
- เปิดแอปพลิเคชันและตรวจสอบชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่เลือก

ไฟไม่กระพริบในโหมดเสียง

- ตรวจสอบว่าเสียงเพลงกำลังเล่นอยู่
- ปรับปุ่ม Sensitivity Knob ด้านหลังอุปกรณ์เพื่อปรับความไวของแสง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Light Alchemy AuraSync เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์ หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com