



คู่มือการใช้งาน Mandala Breeze



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 8.1

อัปเดตล่าสุด 1 มิถุนายน, 2569

1. หมายเหตุทั่วไป

1.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

Mandala Breeze เป็นอุปกรณ์สุขภาพแบบพกพาที่ทันสมัย ช่วยฟื้นฟูความสมดุลและลดความเครียด โดยใช้สนามแม่เหล็ก การบำบัดด้วยแสง และการสั่นอย่างนุ่มนวล ขจัดความอึดอัดและไปฟิลาช่วยปรับการไหลเวียนของพลังงานในร่างกาย ส่งเสริมความรู้สึกผ่อนคลายและความเป็นอยู่ที่ดี

เชื่อมต่อกับแอป Mandala Breeze เพื่ออัปเดตและสร้างโปรแกรมที่ปรับแต่งเองสำหรับการ ปรับสมดุลพลังงาน แอปยังรวมโปรแกรมพื้นฐานที่พร้อมใช้งานทันที นอกจากนี้ ด้วยการสแกน Mandala Scan คุณสามารถวิเคราะห์สถานะพลังงานของร่างกายและค้นหาโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสงและเสียงเพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB, LED UV-C, IR-LED และ PCB Coil
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ

1.3 ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อเปิดกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยในคู่มือนี้
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ หรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 30°C
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- Mandala Breeze มีการรับประกัน 1 ปีนับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากพบปัญหา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทันที
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายจาก:

- การใช้ผิดวิธีหรือการละเลย
 - การดัดแปลงหรือการแยกชิ้นส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 - ค่าธรรมเนียมศุลกากร/นำเข้า หรือความเสียหายทางอ้อม
- หากต้องการซ่อมแซมจากการใช้ผิดวิธี ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง)

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- ห้ามใช้เครื่องหากพบว่าชำรุด โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศของคุณก่อนใช้
- ชาร์จไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่งก่อนใช้ครั้งแรก
- ห้ามแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงเครื่อง
- เก็บให้แห้ง หลีกเลียงฝน ความชื้นสูง ความร้อน ฝุ่น และแสงแดดโดยตรง

1.6 การเก็บดูแลรักษา

- เก็บเครื่องให้สะอาดเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดี
- ใช้ผ้านุ่มหรือน้ำยาเช็ดกระจกสำหรับทำความสะอาด
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

1.7 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

- Mandala Breeze
- สาย USB Type-C
- สายคล้องคอ
- กล่องบรรจุ



2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 ข้อมูลเฉพาะ

ชื่อสินค้า:	Mandala Breeze
สี:	ขาว
วัสดุ:	ABS + อะคริลิก
แรงดันใช้งาน:	5V DC
ช่องชาร์จ:	USB Type-C
ประเภทแบตเตอรี่:	ลิเทียมโพลิเมอร์ 3.7 V/500mA
ไฟ LED:	LED RGB, LED UV-C, IR-LED, PCB
ขดลวด:	ขดลวดไปฟิลาไร์/ขดลวดควอนตัม
ความถี่สัญญาณ:	1Hz – 35 kHz
บลูทูธ:	Bluetooth 5.0
ความยาว:	45 มม.
ความกว้าง:	45 มม.
ความสูง:	18 มม.
น้ำหนัก:	320 กรัม

2.2 ส่วนประกอบและการทำงาน



2.3 การเริ่มต้นใช้งาน

- หากต้องการเปิดเครื่อง กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันพื้นฐาน
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: BZ2-XXXX
- เลือกโปรแกรมบำบัดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง กดปุ่ม 2 ครั้ง แบบดับเบิลคลิก เครื่องจะหยุดทำงานทันที
- หลังจากเปิดการทำงาน ตัวเครื่องจะปิดตัวเองอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 60 นาทีต่อรอบการใช้งาน

2.4 การชาร์จไฟ

- เชื่อมต่อสาย USB-C เข้ากับเครื่องและอะแดปเตอร์ แล้วเสียบเข้ากับช่องเสียบปลั๊ก
- การชาร์จใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งจากแบตเตอรี่ที่หมด และใช้งานได้นานกว่า 4 ชั่วโมง
- ไฟสีแดงจะกะพริบขณะชาร์จและจะหยุดเมื่อแบตเตอรี่เต็ม
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะไม่ทำงาน ไฟ LED สีแดงจะกะพริบ เพื่อแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการชาร์จ
- เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED สีแดงจะค้าง หมายถึงการพร้อมใช้งาน




เพื่อยืดอายุแบตเตอรี่ ห้ามชาร์จไฟเกินกำหนด

3. แอปพลิเคชัน Mandala Breeze (มีทั้งหมด 11 ภาษาให้เลือก)


3.1 การติดตั้งแอป

แอป Mandala Breeze พร้อมใช้งานบน iOS และ Android ดาวน์โหลดได้จาก App Store สำหรับ iOS หรือ Google Play Store สำหรับ Android สำหรับผู้ใช้ในจีน โปรดดาวน์โหลดจาก [Light Mandalas Applications & Downloads](#)

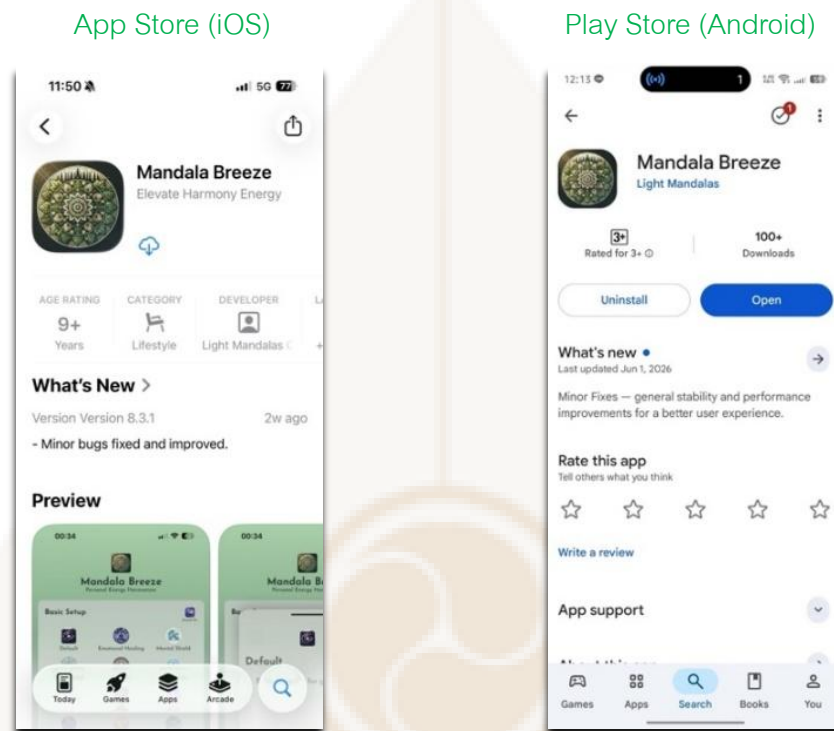


3.2 การจับคู่บลูทูธกับแอป

แตะไอคอน "Settings" ที่มุมขวาล่าง แล้วเลือก "Set Up Mandala Breeze" แอปจะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง จากนั้นเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

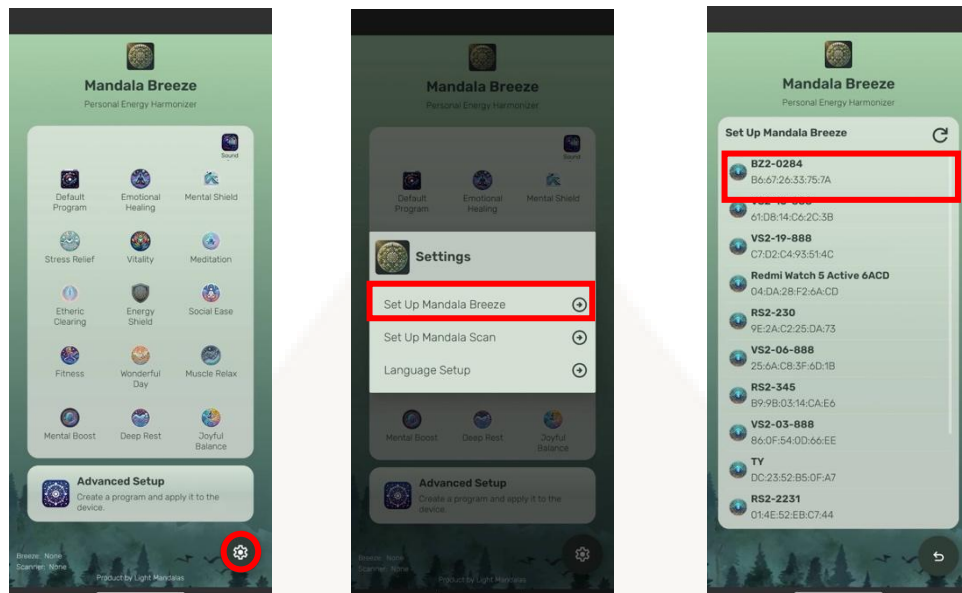



3.3 การตั้งค่าเบื้องต้น

โหมด Default: ปรับสมดุล
พลังงานเพื่อสร้าง
บรรยากาศที่สงบและมั่นคง

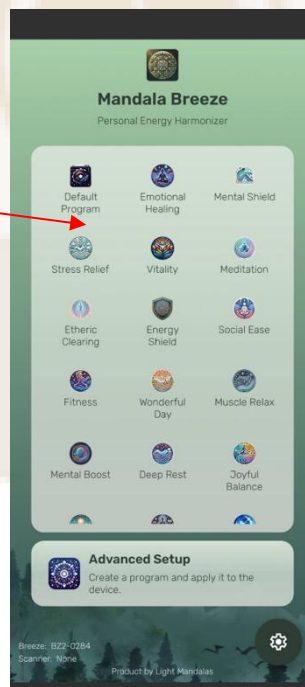

3.4 โปรแกรมพื้นฐาน




หลังจากตั้งค่าแอปแล้ว ให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการ และแตะ "Apply" เพื่ออัปโหลด

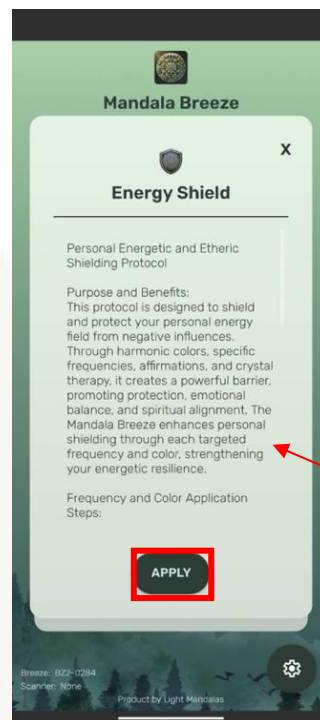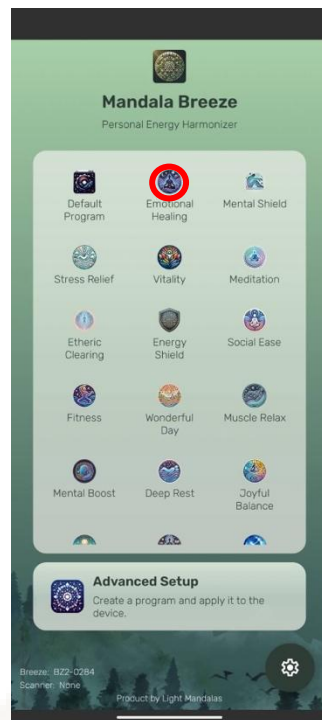

คำอธิบายและ
คำแนะนำพื้นฐาน


3.5 Advanced Setup

"Advanced Setup" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่าความถี่โดยใช้ไลบรารีหรือความถี่ของตัวเอง ผู้ใช้สามารถรวมความถี่เพื่อสร้างโปรแกรมส่วนตัวของตัวเอง

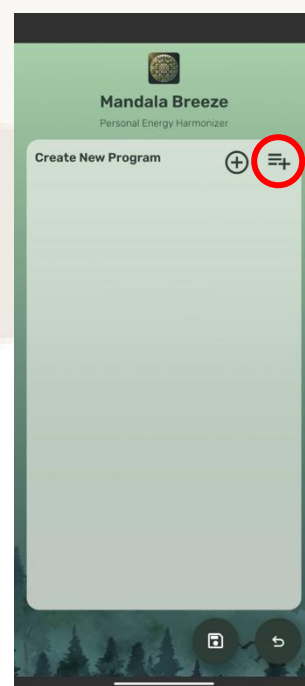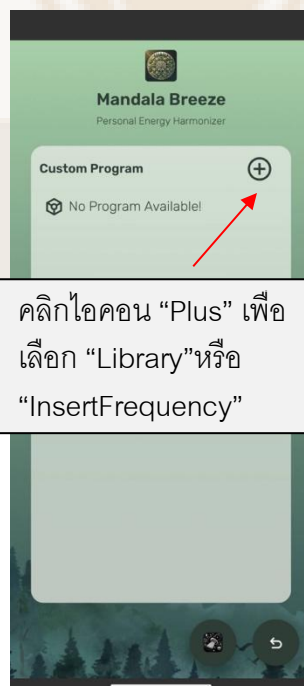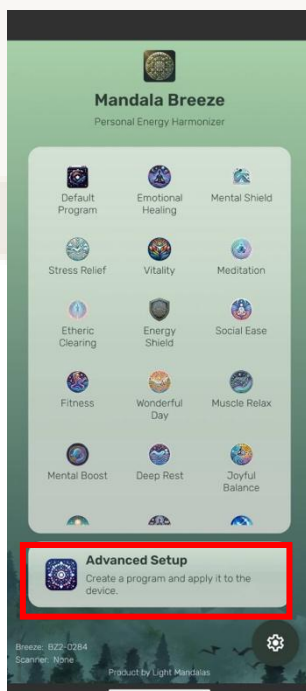


กดไอคอนนี้เพื่อเลือก
จากคลังไลบรารี และ
สร้างโปรแกรมของ
ตัวเอง


3.5.1 Library

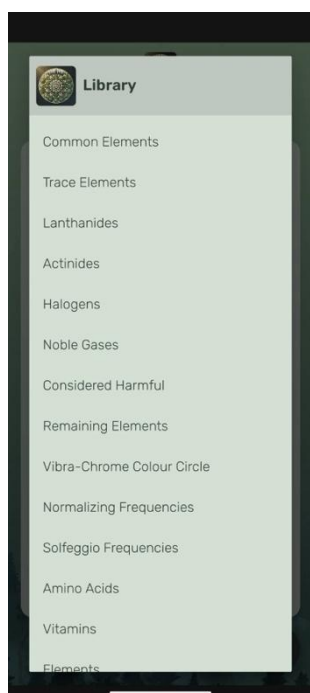

1. เลือกหนึ่งโปรแกรม

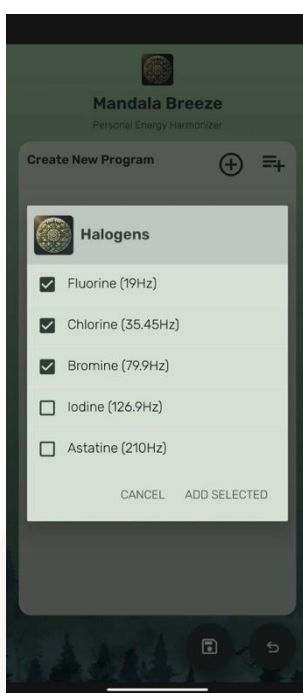


2. เลือกความถี่ที่ต้องการเพิ่ม
ในโปรแกรม แล้วคลิก "Add
Selected"

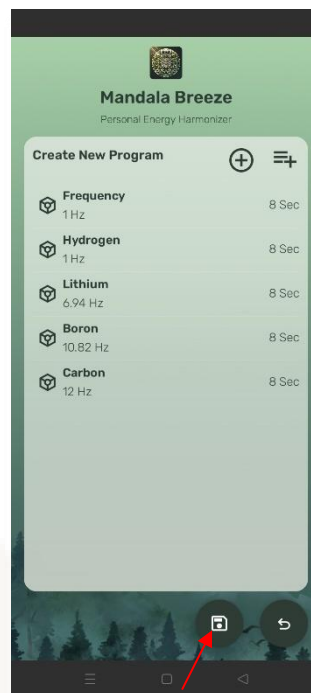

3. คลิกไอคอนนี้เพื่อบันทึกโปรแกรม


3.5.2 Insert Frequency

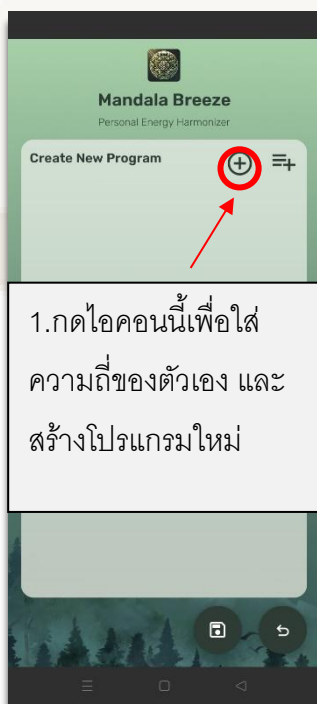

1. กดไอคอนนี้เพื่อใส่
ความถี่ของตัวเอง และ
สร้างโปรแกรมใหม่




2. กดไอคอนนี้เพื่อ
บันทึกโปรแกรม

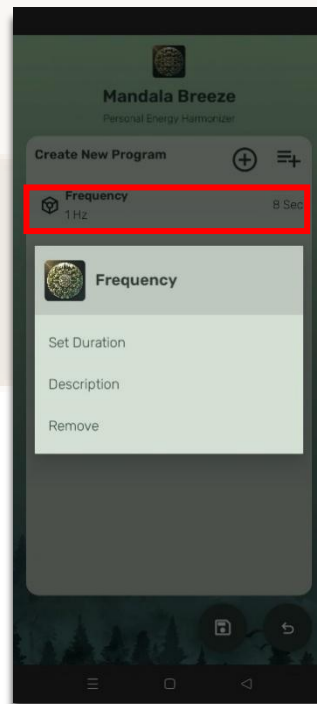

ตั้งค่าจำนวนเวลาของ
ความถี่ เขียนอธิบาย
หรือลบความถี่ที่เพิ่ม


3.6 Mandala Scan

เพื่อใช้ Mandala Scan ให้จับคู่ผ่านบลูทูธก่อน แต่ละไอคอน "Settings" เลือก "Set Up Mandala Scan" และเลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อ

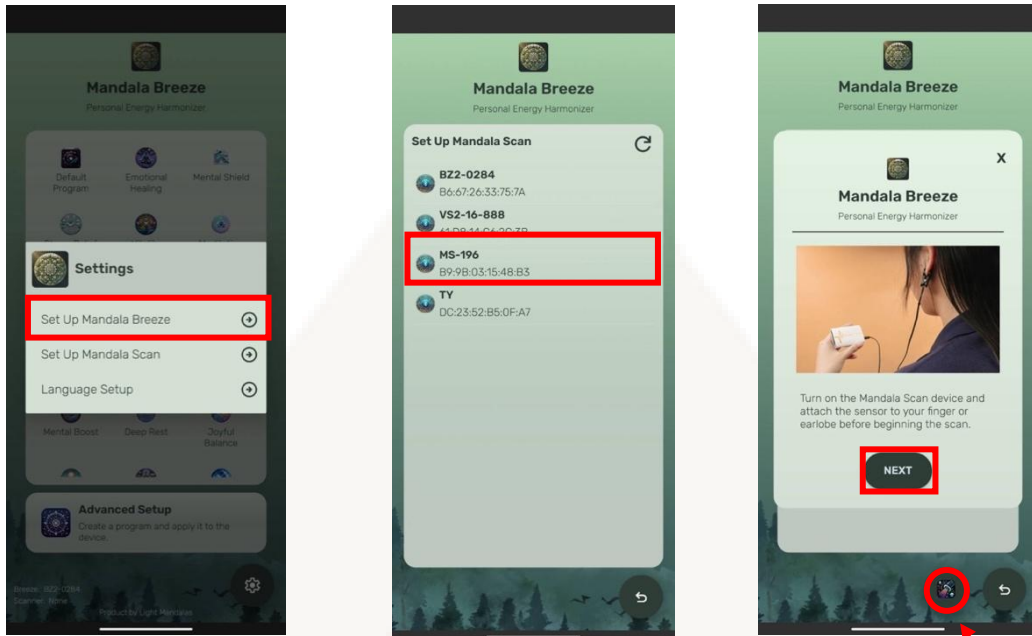

เลือก "Advanced Setup" และแต่ละไอคอน "Mandala Scan" หลังจากจับคู่ Bluetooth แล้ว

3.6.1 Smart Scan

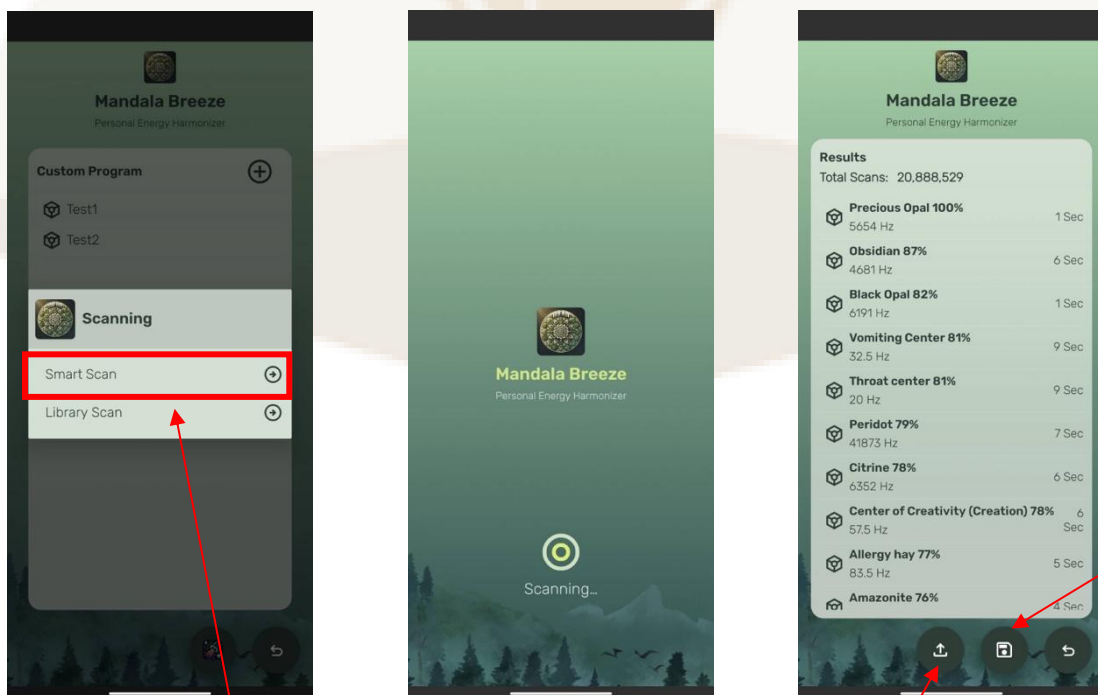


Smart Scan: วิเคราะห์ร่างกายและระบุความถี่ที่เหมาะสมที่สุด

กดไอคอนนี้เพื่ออัปเดตผลสแกนหรือความถี่ไปยัง Mandala Breeze

บันทึกโปรแกรม

3.6.2 Library Scan

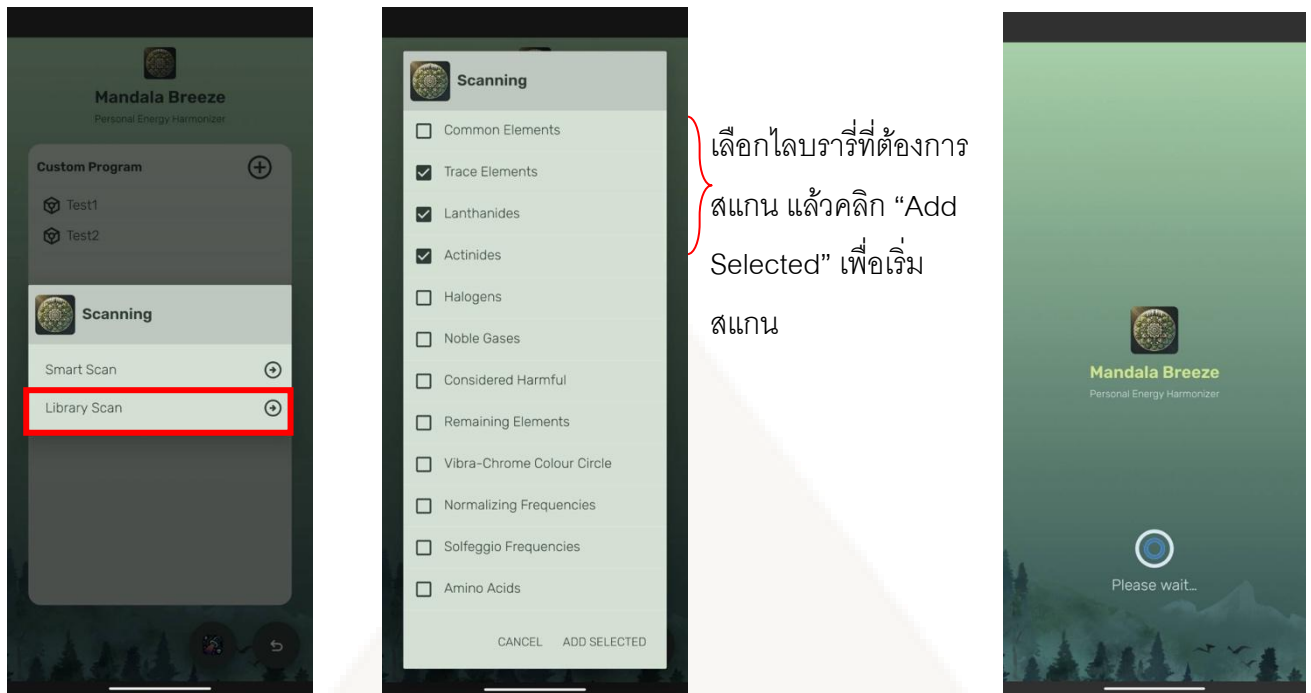

การแก้ไขปัญหา

เครื่องไม่สามารถเปิดได้

- แบตเตอรี่ต่ำ โปรดชาร์จเครื่อง



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Mandala Breeze เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุด ใช้ทันที และปรึกษาแพทย์

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: @mandalawave9
- YouTube Channel: Light Mandalas Official0
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com