



คู่มือการใช้งาน

Mandala Wand



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 1.0

อัปเดตล่าสุด 26 กรกฎาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 คุณสมบัติและการใช้งาน

Mandala Wand เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพแบบพกพาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปรับสมดุลพลังงานในร่างกายและเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีแสงบำบัดและคลื่นพลังงานสเกลาร์ขั้นสูง ตัวเครื่องประกอบด้วยขดลวดควอนตัมและไบฟีลา ช่วยส่งเสริมการไหลเวียนพลังงานในร่างกาย ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่น

สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน **Mandala Wand** เพื่ออัปเดตและสร้างโปรแกรมเฉพาะสำหรับการปรับสมดุลพลังงานตามความต้องการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ **Mandala Scan** วิเคราะห์พลังงานในร่างกายเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้อีกด้วย

Mandala Wand ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว พร้อมสนับสนุนการดูแลสุขภาพของคุณทุกที่ ทุกเวลา

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์ปรับความถี่แสง เพื่อการบำบัด
- ใช้วงจรถือเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB, LED UV-C, IR-LASER, VIOLET – LASER, PCB Coil และ PCB ANT
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ
- ใช้ Jack Output 3.5 mm. เพื่อสามารถฟังเสียงเพลงผ่านตัวเครื่อง

1.3 คำเตือนด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมภายในกล่องให้ครบถ้วน
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มืออย่างเคร่งครัด
- ห้ามเปิดใช้งานโดยมองผ่านสายตาโดยตรง เนื่องจาก มี Laser เป็นส่วนประกอบ
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เต้าไฟ

- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา **1 ปี** นับจากวันที่ได้รับสินค้า
- หากมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
 - การใช้งานผิดวิธีหรือประมาทละเลย
 - การดัดแปลงหรือถอดประกอบเครื่องเอง
 - ค่าภาษีศุลกากรหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ
 - หากความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดวิธี ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งเองทั้งหมด

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- หากเครื่องชำรุดหรือเสียหาย ห้ามใช้งาน ควรติดต่อฝ่ายบริการ
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศที่คุณใช้งานก่อนเริ่มชาร์จ
- ควรชาร์จไฟครั้งแรกอย่างน้อย **1 ชั่วโมง** ครั้ง
- ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องเอง
- หลีกเลี่ยงน้ำ ความชื้น ความร้อนจัด และฝุ่นละออง

1.6 การดูแลรักษา

- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรชาร์จไฟอย่างน้อย **2 ชั่วโมง** ก่อนใช้งาน
- ใช้ผ้านุ่มหรือสเปรย์ทำความสะอาดกระจกที่มีส่วนผสมของน้ำในการเช็ดทำความสะอาด
- ควรรักษาความสะอาดตัวเครื่องเสมอเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 การเริ่มต้นใช้งาน

- หากต้องการเปิดเครื่อง กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันพื้นฐาน
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: MW2-XXXX
- เลือกโปรแกรมบำบัดที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง กดปุ่ม 2 ครั้ง แบบดับเบิล เครื่องจะหยุดทำงานทันที

1.8 การตั้งค่าพิเศษ

- มีปุ่ม Mode ให้กดเลือกโหมด โดยมีอยู่ 4 โหมด คือ Basic program, Preset, Bluetooth, และ Audio
- มีปุ่ม Select ให้กดเลือก Basic program, Preset ที่เราอัปโหลดไว้ในตัวเครื่องทั้ง 5 ช่อง
- มีปุ่ม Func ให้กดเลือก เปิด/ปิด เอาพุดต์ต่างๆ เช่น LED RGB, LED UV-C, IR-LASER, VIOLET – LASER, และ PCB ANT
- มีปุ่ม Start ให้กด เริ่ม/หยุด การทำงานของ Basic program, Preset ชั่วคราว
- ในแอปพลิเคชัน จะมี
 - o Basic Program จำนวน 16 กลุ่มโปรแกรมให้เลือกใช้งาน
 - o ฟังก์ชัน Frequency mode จะมี กลุ่ม Library จำนวน 41 กลุ่มให้เลือกใช้งาน
 - o ฟังก์ชัน Frequency mode จะมีฟังก์ชันใส่เลขความถี่ที่เราต้องการ ตั้งแต่ 1- 25MHz และสามารถปรับแสง LED ที่เราต้องการ
 - o ฟังก์ชันที่สามารถ ตั้งค่าผ่าน Mandala scan ได้
 - o ฟังก์ชัน Preset ที่สามารถสร้าง Preset ที่เราต้องการเป็นของตัวเอง และสร้างอัปโหลดเก็บไว้ใน Mandala Wand ได้ถึง 5 Preset
 - o ฟังก์ชันที่สามารถ ตั้งค่าภาษาได้ ทั้งหมด 11 ภาษา
- หลังจากเปิดการทำงาน ตัวเครื่องจะปิดการทำงานตัวเองอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 45 นาที ต่อบรรณาการทำงาน

1.9 อุปกรณ์ภายในกล่อง

- Mandala Wand
- สายชาร์จ USB Type-C
- ถุงใส่ Mandala Wand

- ลูกแก้วสัญลักษณ์ 3 ลูก



1.10 ระบบการชาร์จของตัวเครื่อง

- เมื่อถอดสายชาร์จ-ใช้งานปกติ ไฟ LED สถานะจะมีอยู่จำนวน 4 ดวง เขียว เขียว ส้ม แดง แทนเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ 100% 75% 50% 25%
- เมื่อแบตเตอรี่หมดจะเหลือแค่ ไฟ LED สีแดงจะกะพริบ เพื่อแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำกว่า 10%
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ เครื่องจะไม่ทำงาน ไฟ LED กะพริบตามระดับ เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่
- เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ ทั้ง 4 ดวงจะค้าง หมายถึงพร้อมใช้งาน

2. ข้อมูลทางเทคนิค

2.1 ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า	Mandala Wand
วัสดุตัวเครื่อง	ทอง
วัสดุ	ABS
แรงดันไฟฟ้า	5V DC
ช่องชาร์จ	USB Type-C
แบตเตอรี่	ลิเทียมโพลีเมอร์ 3.7 V/ 2000mA
การเชื่อมต่อ	Bluetooth 5.0 และ Bluetooth Audio
ขนาดสินค้า	57 x 175 x 32 มม.

น้ำหนักรวม
ความถี่หลัก
ความถี่สัญญาณ:


142 กรัม
0-40MHz (สี่เหลี่ยม) / ขดลวดไบฟีลา 0-40MHz (ไซน์เวฟ)
1 Hz – 25MHz

2.2 โครงสร้างเครื่อง



2.3 การติดตั้งฐานลูกแก้ว

ฐานลูกแก้วออกแบบมาให้ประกอบพอดีกับตัวเครื่อง Mandala Wand โดยจะมีสัญลักษณ์กำกับ 1 จุดบนฐานลูกแก้ว เพื่อให้ผู้ใช้วางตรงตำแหน่งกับแม่เหล็กของตัวเครื่อง

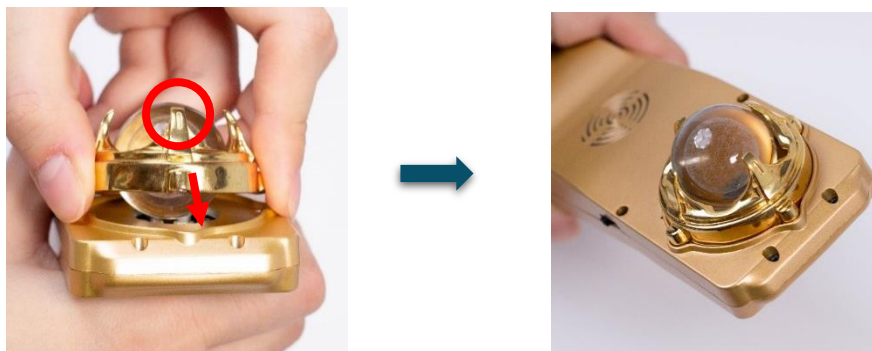

2.4 การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบสาย **USB-C** เข้ากับตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ แล้วเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ
2. ใช้เวลาชาร์จประมาณ **1 ชั่วโมง**ครึ่ง และใช้งานได้ยาวนานประมาณ **4 ชั่วโมง** (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงตามการใช้งาน)
3. ไฟสถานะแบตเตอรี่จะขึ้นเป็นสีแดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ และจะเปลี่ยนจาก แดง → ส้ม → เขียว เมื่อชาร์จเต็ม



ข้อแนะนำ: หลีกเลี่ยงการชาร์จไฟค้างไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

2.5 การใช้งาน Mandala Wand

เมื่อเปิดเครื่อง รอสักครู่เพื่อให้ระบบเริ่มทำงาน

Preset List Mode:

อัปโหลดโปรแกรมสำเร็จรูปไว้ใช้
งานเครื่องแบบไม่ต้องฟังโทรศัพท์

Frequency List Mode:

เลือกและเล่นความถี่เฉพาะ หรือ
นำเข้าได้จากคลังความถี่ในแอป

Mode ใช้สำหรับ

เลือก 4 โหมดตามที่
แสดงด้านบน

Select ใช้สำหรับ
เลือกโปรแกรมความถี่
ตั้งแต่ 1 ถึง 5


Bluetooth Mode: เปิดโหมดนี้
ก่อนเชื่อมต่อ **Bluetooth** กับแอป

Audio Mode: ใช้สำหรับเล่น
เพลงบำบัด เครื่องจะปล่อยแสงและ
คลื่นพลังงานเข้ากับจังหวะเพลง

มีโปรแกรมสำเร็จรูปให้เลือก 5
โปรแกรม

ปุ่ม **“Start”** ใช้เริ่มเล่นโปรแกรม (ใน
โหมด **Preset List**)

ปุ่ม **“Func”** ใช้เลือกฟังก์ชันการ
ทำงาน

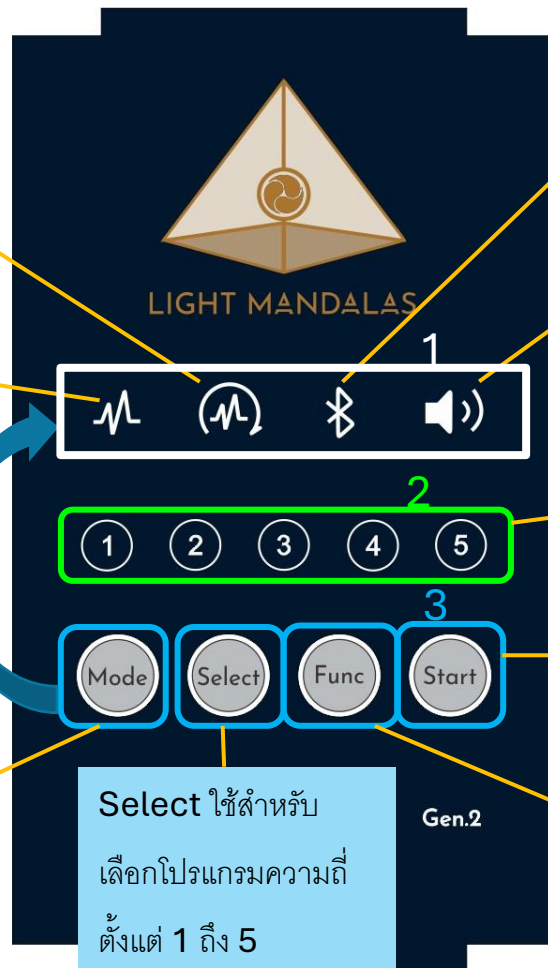


3. แอปพลิเคชัน Mandala Wand

3.1 การติดตั้งแอป


ดาวน์โหลดได้จาก **App Store (iOS)** หรือ **Google Play Store (Android)**

สำหรับผู้ใช้งานในจีน ดาวน์โหลดได้ที่ <https://light-mandalas.com/downloads>

App Store (iOS)

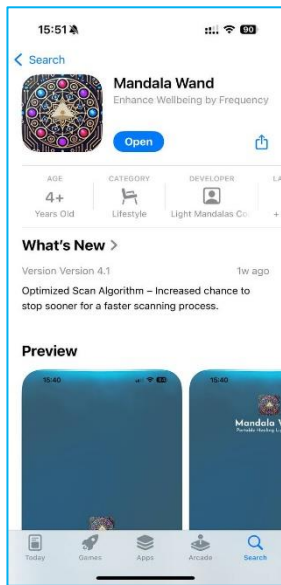

Play Store (Android)

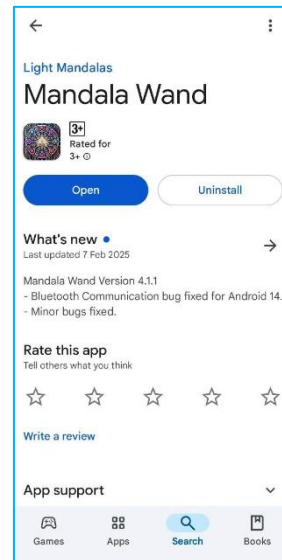


0

3.2 การเชื่อมต่อ Bluetooth


เปิดแอป → แตะ “Settings” → เลือก “Set Up Mandala Wand” เลือก

หมายเลขเครื่องที่แสดง เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth

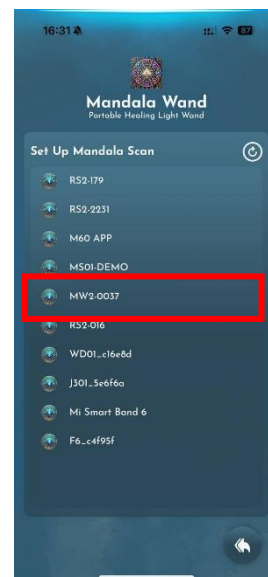

3.3 Basic Program

เลือกโปรแกรมที่ต้องการ → อับโหลดเข้าสู่เครื่อง → กดไอคอน “Play” คุณสามารถอับโหลดโปรแกรมเก็บไว้ในช่อง 1-5 เพื่อใช้งานในอนาคตได้

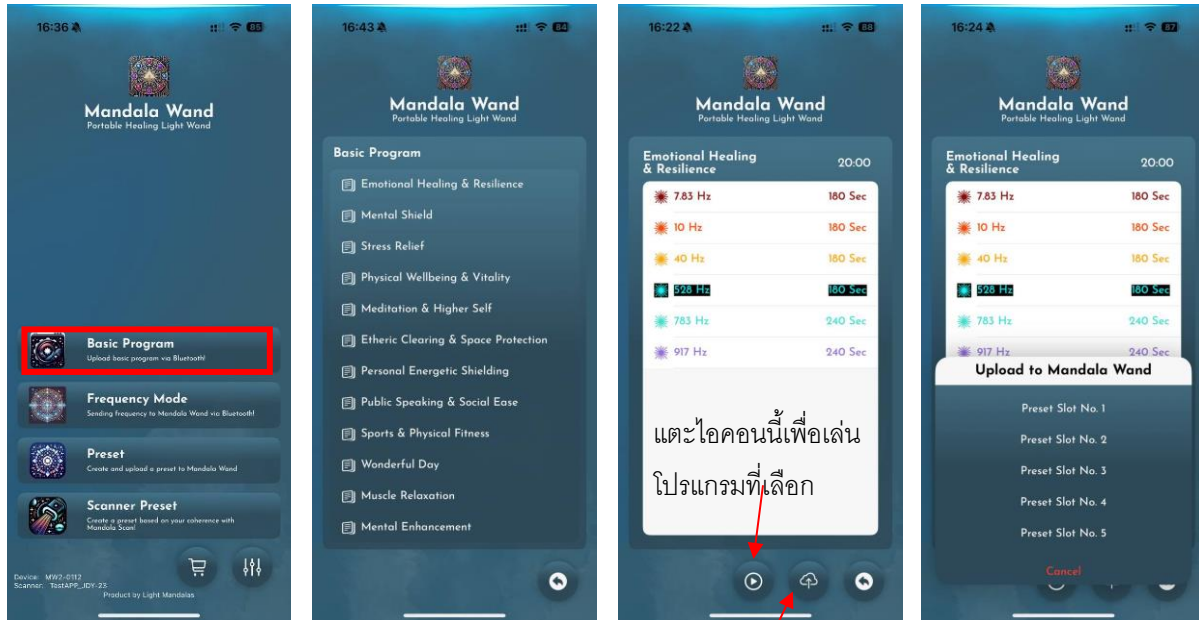




อับโหลดโปรแกรมเข้าสู่
เครื่อง

3.4 Preset

แตะไอคอน “+” → เลือก “Frequency Library” หรือ “Insert Frequency” เพื่อเพิ่มความถี่ตามต้องการ ตั้งชื่อ Preset → กด “Save” เพื่อบันทึกเก็บไว้ใช้งาน


3.4.1 Frequency Library

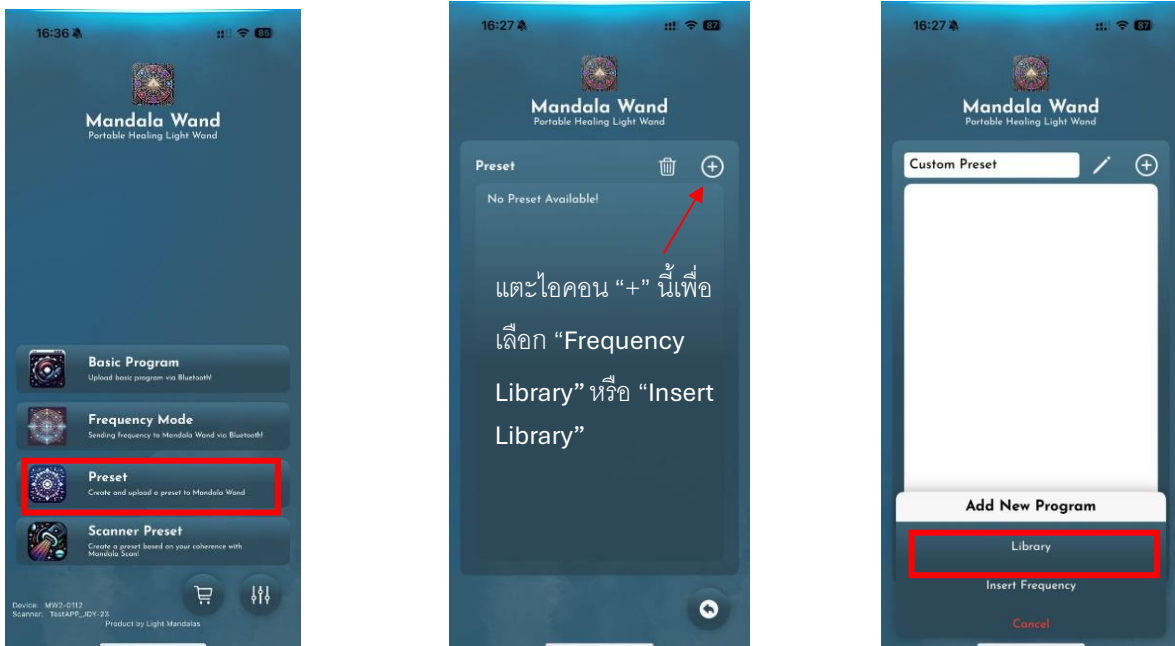

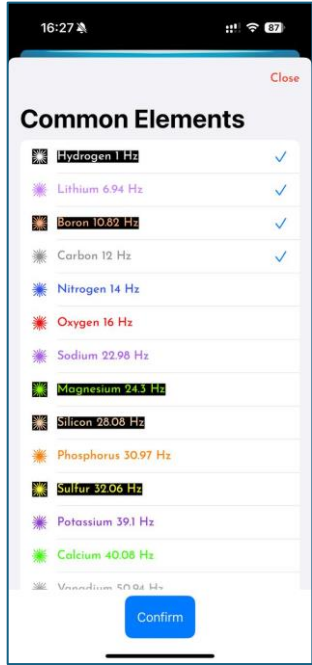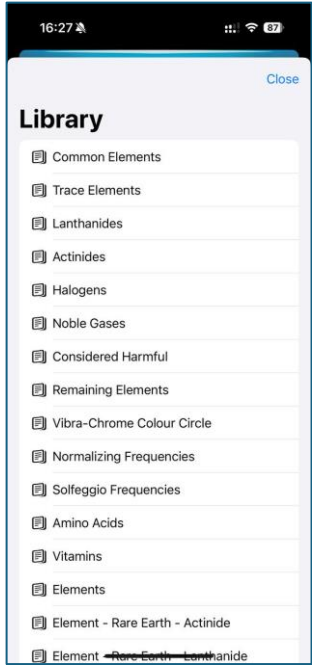



1. ตั้งชื่อสำหรับ Preset

เลือกความถี่ที่ต้องการ
 เพิ่มเข้า Preset แล้วกด
 "Confirm"

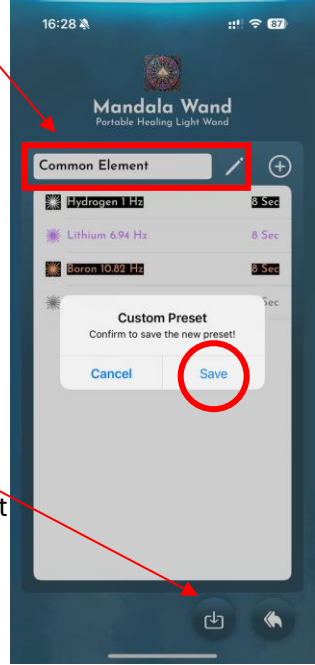


2.แตะไอคอนนี้
 เพื่อบันทึก Preset

3.4.2 Insert Frequency

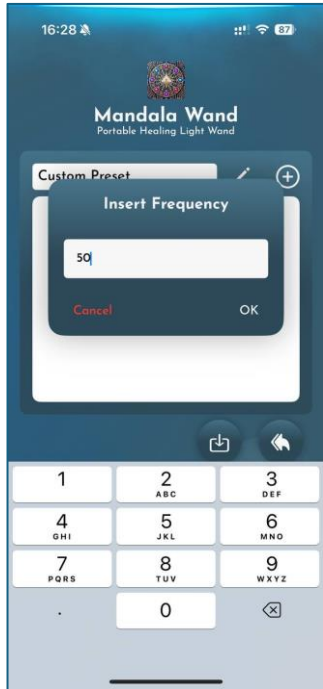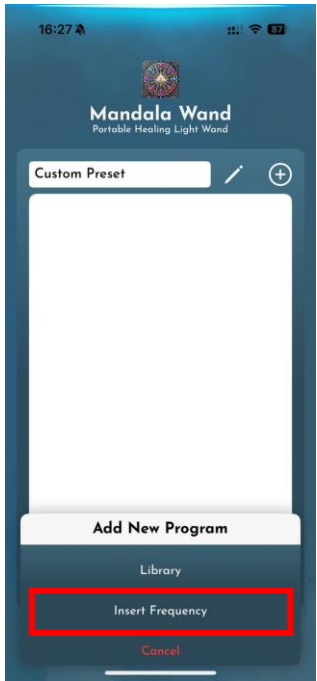


1. ตั้งชื่อสำหรับ Preset

2.แตะไอคอนนี้
 เพื่อบันทึก Preset

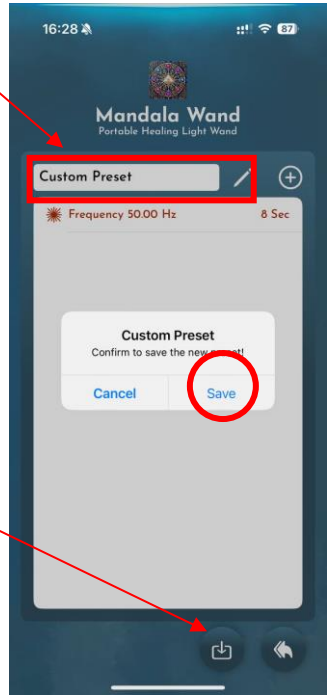


3.5 Mandala Scan

เชื่อมต่อ Bluetooth → เลือก “Mandala Scan” สามารถเลือกใช้ “Smart Scan” เพื่อให้ระบบช่วยวิเคราะห์พลังงานในร่างกาย และเลือกความถี่ที่เหมาะสมที่สุด ณ ขณะนั้น

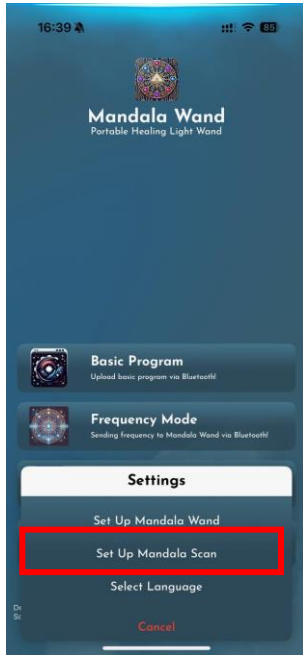

เลือก “Mandala Scan” หลังจากเชื่อมต่อ Bluetooth แล้ว

3.5.1 Smart Scan

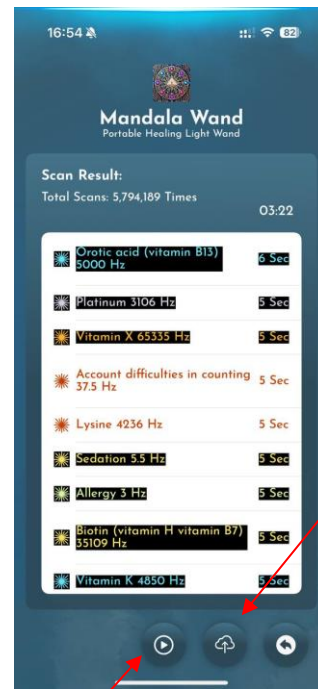


แต่ไอคอนนี้เพื่ออัปเดตผลการสแกนหรือความถี่ไปยัง ไปยังตัวเครื่อง Mandala Wand


Smart Scan จะช่วยวิเคราะห์ร่างกายและเลือกความถี่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ณ ขณะนั้น

แต่เพื่อเล่นความถี่ทั้งหมด

3.5.2 Select Library

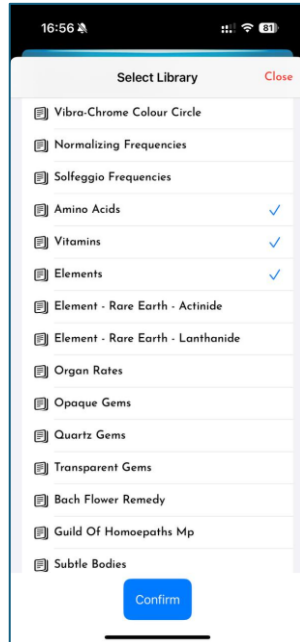

เลือกคลังความถี่ที่
ต้องการสแกน
จากนั้นกด
'Confirm' เพื่อเริ่ม
สแกน

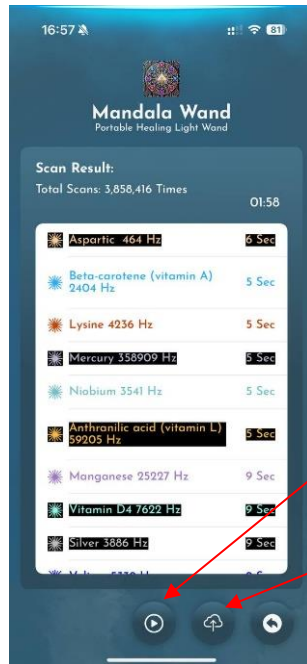


แตะเพื่อเล่นความถี่ทั้งหมด
แตะไอคอนนี้เพื่ออัปเดตผล
การสแกนหรือความถี่ไปยัง
Mandala Wand

3.6 Audio Frequency

เปิดโหมด “Audio Mode” บนหน้าจอ Mandala Wand → เชื่อมต่อหูฟังหรือเครื่องเสียงผ่านช่องเสียบ
→ จับคู่ Bluetooth กับ “Mandala Wand Audio Bluetooth”

เมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือน แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ สามารถเปิดเพลงบำบัดจากแอปฟังเพลงหรือแพลตฟอร์มใดก็ได้

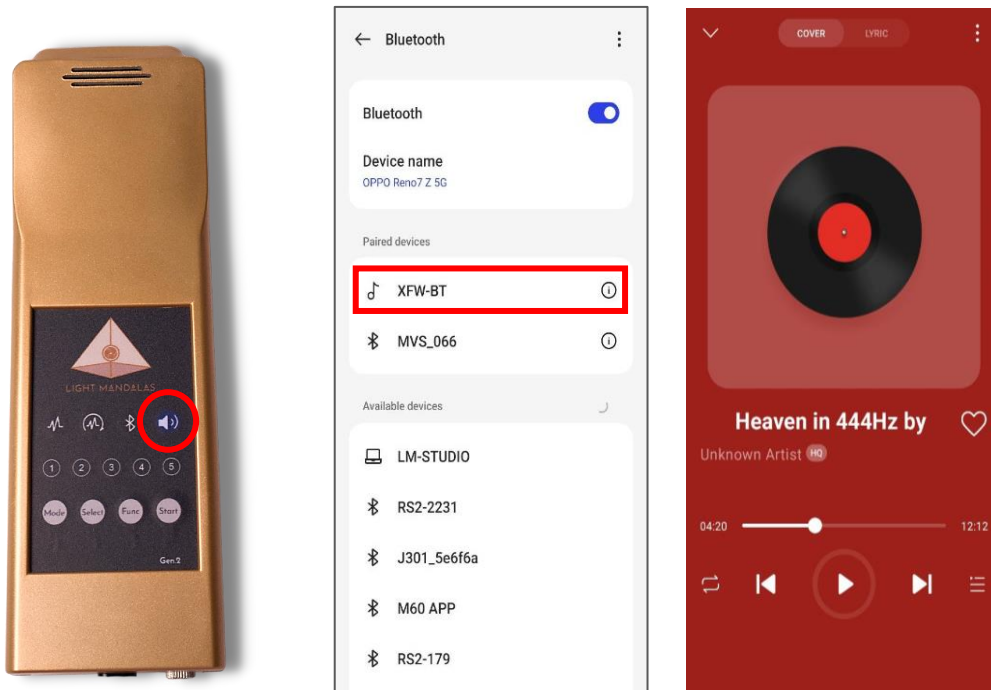

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เครื่องไม่เปิด

- แบตเตอรี่อ่อน → กรูณาชาร์จแบตเตอรี่

เชื่อมต่อแอปไม่ได้

- ตรวจสอบว่าเครื่องอยู่ในโหมด **Bluetooth**

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

Mandala Wand เป็นอุปกรณ์สนับสนุนด้านพลังงานเพื่อการผ่อนคลาย ลดความเครียด และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทนการรักษาทางการแพทย์หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้

ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล หากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการผิดปกติ ควรหยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์

บริษัท Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งาน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: @mandalawave9
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com